

# LUAZON

## МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ

Модель: LMZ-048.  
Артикул: 1167382.



### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Массажер для шеи LuazON LMZ-048 оказывает вибрационное воздействие на мышцы шеи, массирует их, ускоряет кровообращение, что способствует снижению боли. Ежедневное применение стимулирует мышцы шеи, через какое-то время вы заметите общее улучшение состояния.

Устройство работает от батареек, имеет небольшой вес и размер.

Удобный ремень с застежкой-липучкой обеспечивает комфортное расположение рабочей платформы на массируемом участке. Анатомическая форма массажера повторяет форму шеи, позволяет выполнять массаж в любое удобное для вас время, в любом месте (дома, в офисе, на даче). Особенно рекомендуется для людей, ведущих сидячий образ жизни (офисных сотрудников, водителей и т.д.).

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Работает от 4 батареек AA (не в комплекте)

Материал: искусственная кожа, текстиль

Гарантия: 6 месяцев.

Комплектация: расческа-массажер, инструкция, гарантийный талон.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Массажер ориентирован на:

- снятие излишнего мышечного напряжения в области шеи;
- стимулирование кровообращения;
- ускорение обмена веществ в организме;
- профилактику болезней шейного отдела;
- профилактику отложения солей и появления «соляного горба».

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.


- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

#### **Не используйте массажер:**

- во время беременности;
- при тромбозе;
- при острых заболеваниях;
- при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

#### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая полярность. После этого поместите отсек для батареек внутрь массажера в специальный карман таким образом, чтобы он не мешал вам в процессе массажа.
2. Зафиксируйте массажер на шее при помощи липучек, как показано на рисунке ниже.

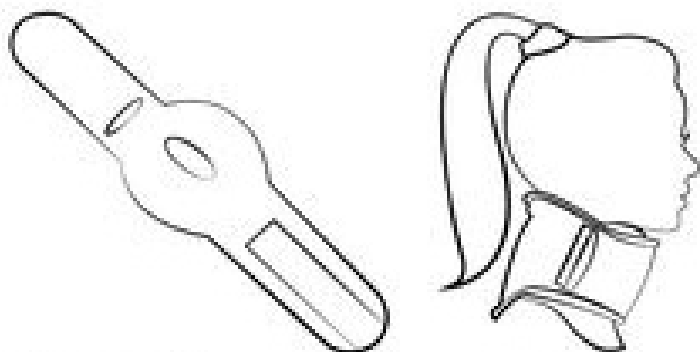

**Внимание!** Рекомендуемое время использования — 5–10 минут, не более 30 минут.

3. По окончании процедуры выключите массажер.

#### **ЧИСТКА И УХОД**

- При необходимости протирайте массажер снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки химически активные или абразивные чистящие средства.
- Храните в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.