

LUAZON

Артикул: 161851.
Модель: 9015.

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию.


Антицеллюлитный массажер работает по принципу электрической стимуляции мышц (EMS). Он генерирует мягкие электрические импульсы, которые через кожу передаются мышцам, сокращая их. Благодаря этому достигается красивое и подтянутое тело без усилий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работает от 2 батареек CR2032
- 6 режимов работы

Гарантия: 6 месяцев.

Комплектация: массажер-миостимулятор для тела, 2 батарейки CR2032, инструкция, гарантийный талон.

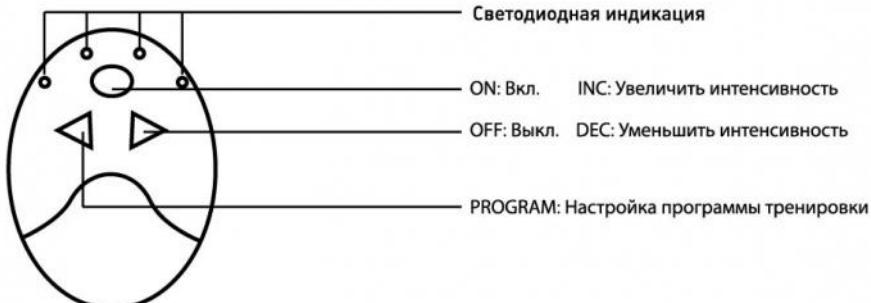




Артикул: 161851.
Модель: 9015.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. В первую неделю не рекомендуется пользоваться миостимулятором чаще одного раза в день, чтобы дать мышцам медленно привыкнуть к прибору. После можно тренироваться чаще.
2. Перед началом эксплуатации проверьте прибор на отсутствие признаков повреждения.
3. Перед каждой тренировкой следует убедиться в том, что кожа чистая и не покрыта кремом или маслом. Только в этом случае прибор может работать оптимальным образом.
4. Наденьте и включите массажер (ON). Начнет светиться первый светодиод, информируя вас, что устройство готово к работе.
5. Выберете подходящую вам программу тренировки (PROGRAM).

Режимы работы:

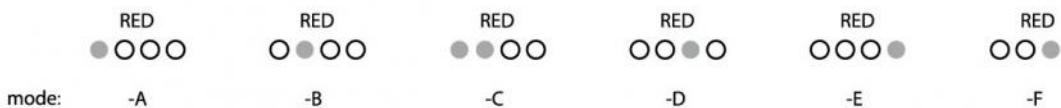

6. Регулируйте интенсивность с помощью кнопок «INC» и «DEC».
7. Чтобы выключить массажер используйте кнопку «OFF». Необходимо уменьшить интенсивность до минимального уровня, после чего при последующем нажатии кнопки устройство выключится.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если прибор после включения не используется, то через 12 минут он автоматически выключается.

УХОД

1. Перед каждой очисткой отсоединяйте пульт управления от прибора.
2. Очищайте прибор слегка смоченной тканью. При сильном загрязнении вы можете помыть прибор с легким мыльным раствором.
3. Не допускайте падений прибора.
4. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь прибора. Если это случилось, используйте прибор повторно только после того, как он полностью высох.



Артикул: 161851.
Модель: 9015.

5. Для очистки не применяйте химические или абразивные средства.

В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ:

- Наличие кардиостимулятора.
- При наличии металлических имплантатов.
- Нарушения сердечного ритма.
- Острые заболевания.
- Эпилепсия.
- Раковые заболевания.
- В областях повреждений кожи и порезов.
- Беременность.
- При склонностях к кровотечениям, например, после острых травм или перелома. Поток раздражения может вызывать или усиливать кровотечения.
- После операций, при которых усиленное сокращение мышц может помешать процессу выздоровления.
- При одновременном присоединении к высокочастотному хирургическому аппарату.
- При низком или высоком кровяном давлении.
- Высокая температура.
- Психозы.
- На опухших или воспаленных частях тела.
- На поврежденных кожных покровах, при воздействии на которые усиленное сокращение мышц может помешать процессу заживления.
- Вблизи (менее 1 м) коротковолновых или микроволновых терапевтических приборов, т. к. это может приводить к колебаниям выходных параметров прибора.

Перед использованием прибора обратитесь к вашему врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен только для здоровых взрослых людей.
- Не используйте устройство в целях, для которых он не был разработан.

Его запрещено применять:

- в области головы (возможны приступы и судороги);
- в области шеи / сонных артерий (возможна остановка сердца);



Артикул: 161851.
Модель: 9015.

- в области глотки и гортани (возможны приступы и судороги);
- вблизи грудной клетки (возможно повышение опасности мерцания желудочков сердца и остановка сердца).
- Используйте массажер в соответствии с инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации может быть опасным.
- Не используйте этот прибор одновременно с другими приборами, которые передают телу электрические импульсы (например, TENS-приборы).
- Прибор предназначен только для персонального использования. Он не предназначен для использования в медицинских или коммерческих целях.
- Во избежание возможных опасностей храните прибор в недоступном для детей месте.
- Берегите прибор от открытого огня и мощных источников тепла.
- Не пользуйтесь прибором вблизи коротковолновых и микроволновых приборов (например, мобильных телефонов), т. к. они могут повлиять на работу прибора.
- Не пользуйтесь прибором во время приема ванны или душа.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Незамедлительно выключите прибор, если он неисправен или имеются неполадки в работе. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, а обратитесь в специализированный сервисный центр.

LuazON. Искусство заботы о близких.