

МАССАЖЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Многофункциональный электрический массажер LuazON улучшает кровообращение, снимает напряжение в мышцах после тяжелого дня, интенсивных тренировок и физических нагрузок, а также поможет бороться с лишним весом, уменьшить объемы и скорректировать фигуру. Делает кожу упругой и подтянутой, разглаживает морщины, предупреждает старение кожи, обеспечивает выработку коллагена и лифтинг-эффект, заботится о красоте вашей кожи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- регулировка интенсивности;
- 5 насадок;
- мощность: 50 Вт;
- напряжение: 220-240 В / 50 Гц.

Комплектация: многофункциональный электрический массажер, 5 насадок, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.





Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

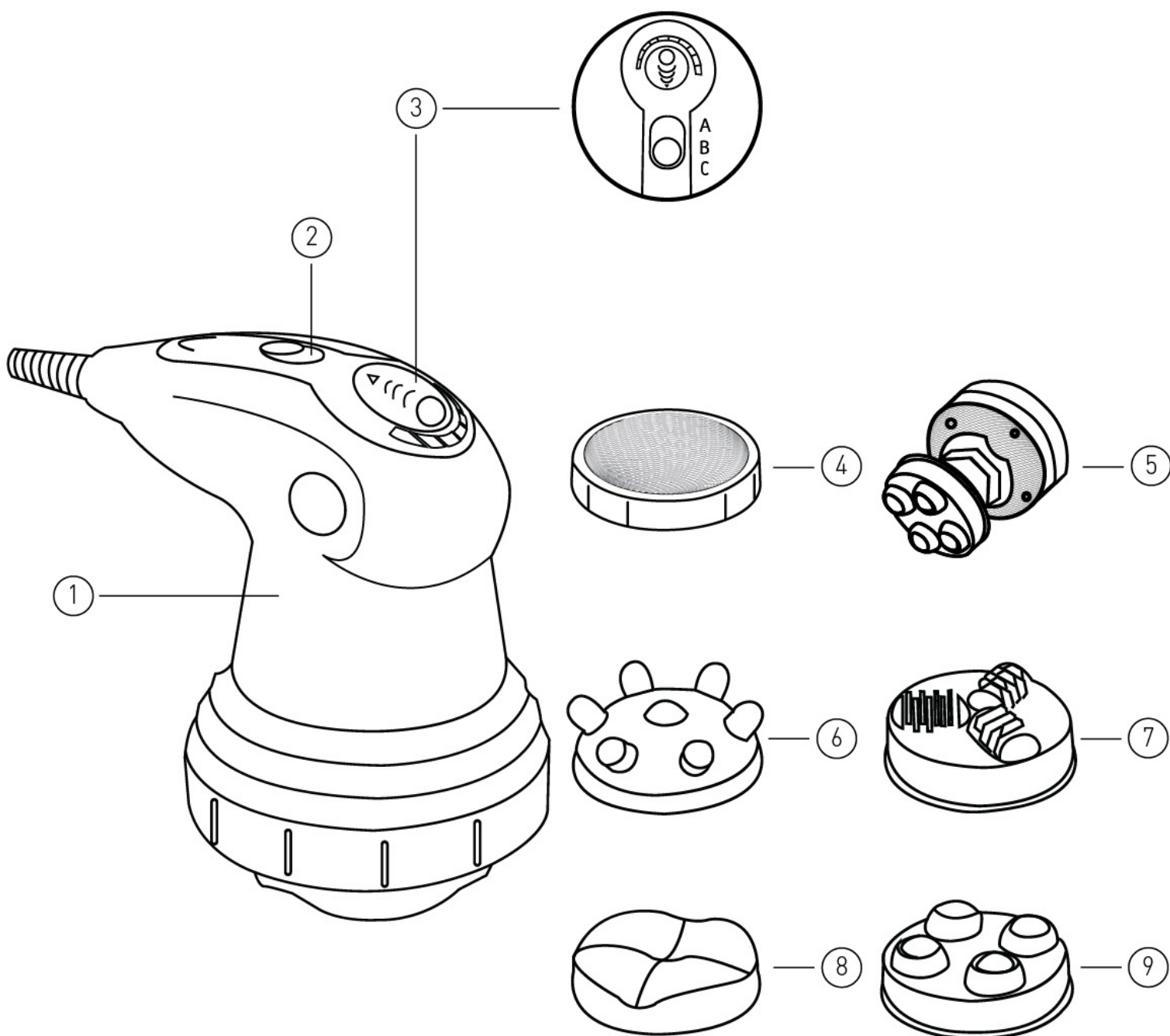

1. Основной корпус прибора
2. Переключатель режимов: Массаж / Массаж с ИК-излучением
3. Регулировка интенсивности массажа
4. Сеточка
5. Адаптер для массажной головки
6. Пальчиковая массажная головка
7. Шариковая массажная головка
8. Волнообразная головка
9. Массажная головка с шариком

Массажные зоны и варианты применения насадок

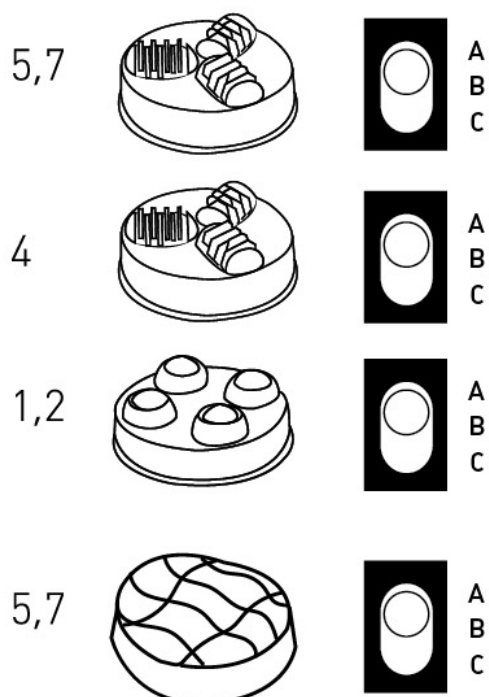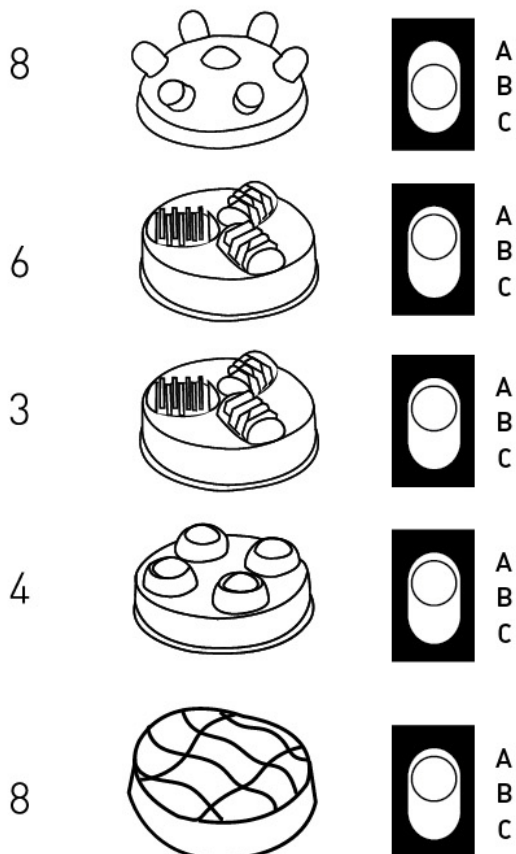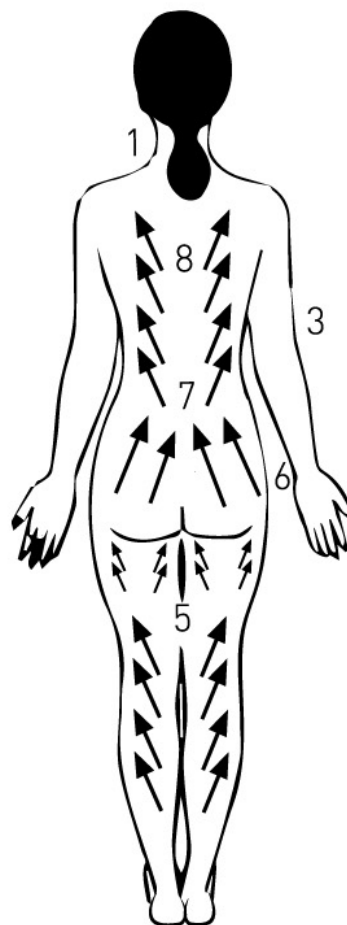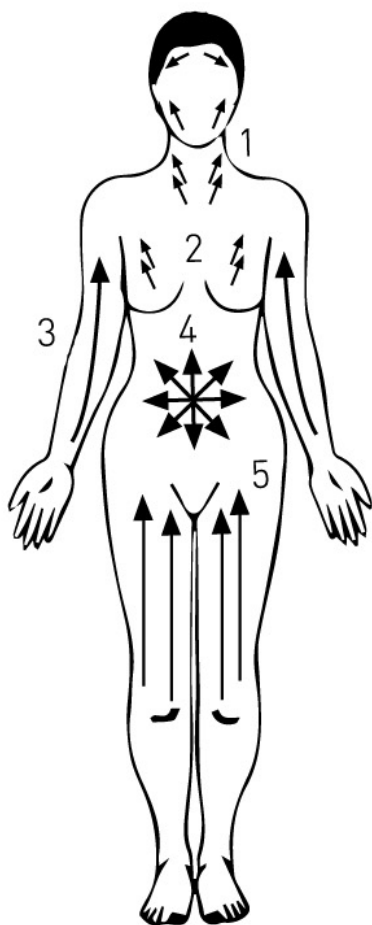

Использование «пальчиковой» головки (6)

Имитирует профессиональный массаж, выполняемый пальцами. Он подходит для антицеллюлитного массажа, рефлексологии стопы (массаж стопы) и мышечного массажа.

Использование «роликовой» головки (7)

Эта головка подходит для массажа проблемных зон, устраняет вялость, стимулирует кровяное давление, тонизирует мышцы, выполняет лимфатический дренаж, уменьшает объемы, разминает мышцы, расслабляет, снимает стресс.

Использование головки «массажные шарики» (8)

Подходит для таких деликатных областей, как лицо, грудь, шея. Активирует мышцы, помогая укрепить кожу, придавая ей упругость. Она улучшает кровообращение в области брюшной полости, устраняет локализованные токсины и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

Использование головки «волновой формы» (9)

Имитирует профессиональный массаж, выполняемый ладонью, тонизируя и улучшая кровоток. Используйте в области бедер и ягодиц. Используйте низкую настройку для лечения деликатной области (лица, шеи, груди, ног с варикозным расширением вен). Подходит для использования беременным женщинам. Используйте самую высокую настройку для массажа менее чувствительных участков тела.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство предназначено только для домашнего пользования. Использование его любым способом, кроме как в соответствии с инструкциями, может быть опасным. Не используйте это устройство в качестве заместителя для соответствующей медицинской помощи.
- Всегда выключайте прибор и храните его вне досягаемости детей и инвалидов. Когда вы используете его в их присутствии, будьте предельно осторожны.
- Данный прибор не должен использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.

- Не изменяйте и не ремонтируйте прибор. В случае каких-либо проблем со шнуром или любой другой частью прибора не используйте его, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить, обратившись к изготовителю или к аналогичному квалифицированному персоналу для предотвращения возможных опасностей.
- Не используйте детали или аксессуары, не входящие в комплектацию массажера.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение соответствует напряжению в вашем доме.
- Всегда вынимайте вилку из розетки после использования и перед удалением или установкой деталей и перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или очистке.
- Не тяните за шнур питания и не подвешивайте прибор за шнур. Всегда вытаскивайте вилку из розетки, потянув за вилку.
- Не пользуйтесь прибором вблизи ванн, раковин, душевых или других местах, содержащих воду.
- Если прибор попадает в воду, не пытайтесь его вытащить. Немедленно отключите его от сети.
- Никогда не погружайте основной корпус в воду или другую жидкость, не помещайте в посудомоечную машину. При чистке прибор не должен контактировать с водой.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Никогда не оставляйте прибор на влажной поверхности или ткани.
- Проконсультируйтесь с врачом, есть ли у вас противопоказания.
- Не используйте массажер, если вы страдаете от кожных высыпаний или воспалений.
- Не используйте продукт перед сном. Массаж может иметь стимулирующий эффект.
- Не используйте массажер в постели.
- Поверхность массажера нагревается при использовании. Будьте осторожны, если у вас повышенная чувствительность.
- Защищайте глаза от воздействия инфракрасного излучения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуется совершать процедуры продолжительностью менее 15 мин. Затем сделайте перерыв и дайте массажеру остыть, прежде чем продолжать работу.

Непрерывное использование прибора более 15 мин. может уменьшить срок его службы.

1. Подключите устройство к сети.

- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Данный прибор не должен использоваться людьми с ограниченными сенсорными, физическими или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные объяснения относительно использования электроприбора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Когда щипцы нагреются, отделите прядь волос, зажмите ее между пластинами и удерживайте в таком положении несколько секунд. Начинайте моделирование от корней волос к их кончикам:
 - для выпрямления волос равномерно распределите прядь между пластинами, сожмите их и медленно проведите по волосам сверху вниз, повторите процедуру на каждой пряди;
 - если вы хотите придать объем волосам по всей длине, начинайте моделирование от корней волос к их кончикам, каждый раз вкладывая в зажим щипцов следующую часть пряди;
 - вы можете придать волосам объем только у корней: для этого поместите прядь в зажим прибора как можно ближе к корням волос.
5. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Не обматывайте шнур вокруг прибора во избежание его повреждений.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.