

*Вакуумный аппарат  
для влажной чистки кожи*

# ***SUPER WET CLEANER***



**Инструкция по эксплуатации**

## **Благодарим Вас за оказанное доверие и поздравляем с покупкой!**

Вы приобрели продукцию фирмы GEZANNE, одной из ведущих компаний на рынке косметических товаров по уходу за лицом и телом.

Вы впервые получаете возможность проводить влажную чистку лица, в том числе с нанесенными на кожу косметическими средствами, что делает эту процедуру более эффективной и безопасной.

Для реализации всех возможностей аппарата Gezatone Super Wet Cleaner мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

## **ВОЗМОЖНОСТИ**

Аппарат Super Wet Cleaner позволяет проводить в домашних условиях процедуры по вакуумной чистке кожи с использованием очищающих растворов муссов, гелей, пенки согласно Вашему типу кожи.

Аппарат Super Wet Cleaner – это быстрая и удобная помощь при жирной, загрязненной и проблемной коже, при чистке пор, комедонах, угревой сыпи, акне.

Аппарат Super Wet Cleaner избавит Вас от гигиенически небезопасной ручной чистки кожи и обеспечит Вам здоровую и чистую кожу.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА**

Мгновенная готовность к работе – аппарат готов к использованию сразу после включения питания.

Безопасность – аппарат сочетает высокую мощность с полной безопасностью.

Влагозащищенность – специальные резиновые уплотнители изолируют внутренние части аппарата, поэтому его можно использовать в ванной комнате или душе (см. раздел «меры предосторожности»). Автономное питание аппарата от батарей обеспечивает полную электрическую безопасность.

Удобная форма и небольшой вес – изящный корпус, позволяющий аппарату удобно располагаться в руке, делает работу с ним очень приятной.

Экономичность – одного комплекта щелочных батарей достаточно для двух-трех часов работы аппарата (реальная продолжительность работы будет зависеть от характеристик используемых батарей).

Простота обслуживания – все части аппарата легко моются.

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Аппарат Gezatone Super Wet Cleaner	1 шт.
Дополнительная резиновая насадка	2 шт.
Батарея питания 1.5 В, тип АА	2 шт.
Сумочка для хранения	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

**Внимание:** После перемещения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать около часа перед его использованием.

## ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ

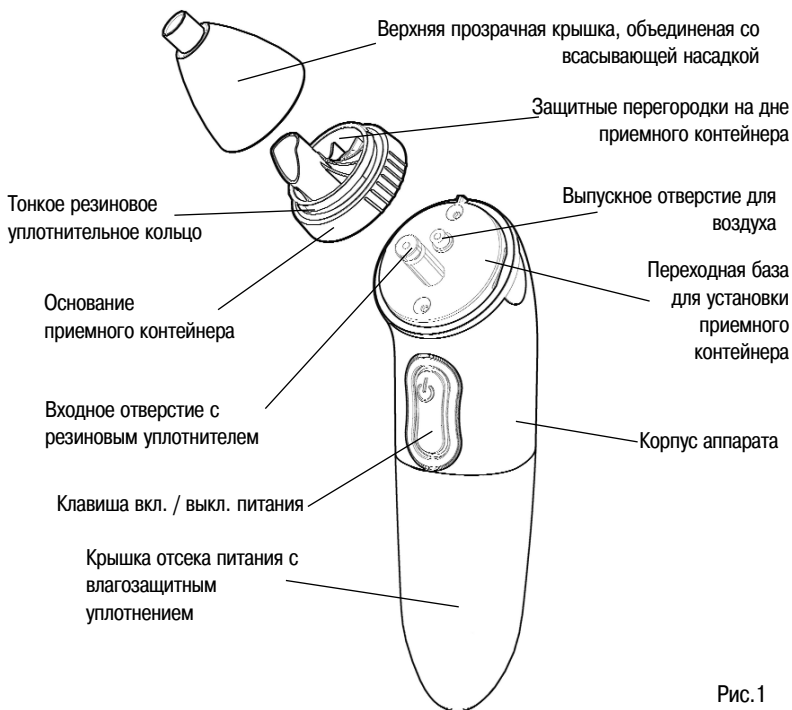


Рис. 1

Аппарат состоит из влагозащищенного *корпуса с отсеком питания*. На корпус устанавливается *приемный контейнер* особой конструкции, обеспечивающий надежный сбор и удержание жидкости и загрязнений с поверхности кожи. Внешний вид аппарата и его частей показан на **Рис. 1**.

Приемный контейнер состоит из *основания и прозрачной крышки*, объединенной с *всасывающей насадкой*. Герметичность установки *прозрачной крышки* обеспечивается *тонким резиновым уплотнительным кольцом*. Основание контейнера фиксируется на аппарате при помощи *переходной базы*. На базе расположены *входное и выпускное* отверстия для воздуха. Все основные элементы конструкции аппарата Super Wet Cleaner имеют *герметизирующие резиновые уплотнения*, выполняющие две главные задачи – сохранение рабочего разрежения в приемном контейнере и защиту внутренних частей аппарата от проникновения влаги. Резиновые уплотнения требуют аккуратного обращения. Пожалуйста, обратите особое внимание на раздел «Обслуживание» и на сохранность тонкого уплотнительного кольца.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 1. Установка батарей питания

Снимите крышку отсека питания. Крышка фиксируется на корпусе аппарата с помощью двух защелок и имеет защитное резиновое уплотнение, поэтому для ее снятия необходимо приложить некоторое усилие. Будьте аккуратны и снимайте крышку в направлении, показанном на **Рис. 2**.

Не прикладывайте бокового усилия!

Вставьте две алкалиновые батареи 1.5 В размера AA в соответствии с указанной на корпусе отсека полярностью и установите на место крышку отсека питания.

**Внимание:** Перед длительными перерывами в использовании необходимо извлекать батареи питания во избежание порчи аппарата.

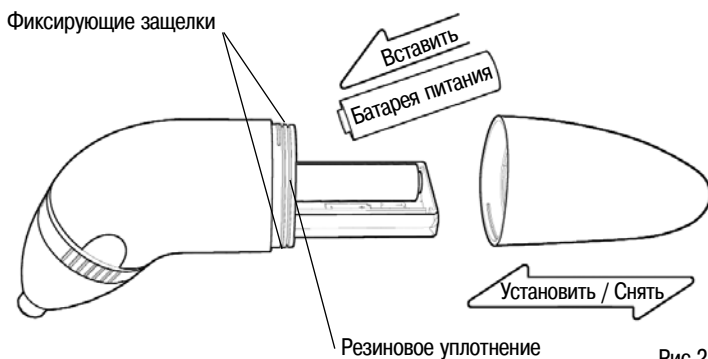


Рис.2

### 2. Сборка и установка приемного контейнера

Установите основание приемного контейнера на переходную базу аппарата (при правильной установке должен послышаться характерный щелчок). Проверьте наличие тонкого резинового уплотнительного кольца. Установите верхнюю прозрачную крышку на основание контейнера, совместив защелки с фиксирующими пазами. Аккуратно поверните по крышке по часовой стрелке до плотной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аппарат предназначен для домашнего использования компетентными совершеннолетними пользователями. Запрещается использование аппарата детьми.

Применяйте аппарат только по его прямому назначению – очистке кожи в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации.

Перед применением аппарата убедитесь, что он прошел очистку. Проводите очистку аппарата сразу же после каждого применения. За более подробной информацией обратитесь к разделу «Обслуживание».

Категорически не рекомендуется задерживать работающий аппарат на одном участке кожи более 2-х секунд.

Аппарат имеет влагозащищенное исполнение. Запрещается полностью погружать корпус аппарата в воду или помещать аппарат под струю воды.

Храните аппарат в сухом и прохладном месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Перед длительными перерывами в использовании извлекайте батареи питания во избежание порчи аппарата.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

- острый воспалительный процесс, гнойнички, фурункулы;
- склонность к кровотечениям;
- телеангиэктазии;
- купероз (расширенные сосуды);
- онкологические заболевания кожи;
- нарушение целостности кожных покровов (царапины, ссадины, экземы и дерматит в период обострения)

### **ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ**

Очистите и подготовьте кожу лица в области воздействия, удалите макияж и декоративную косметику. Для того, чтобы удалить загрязнения, кожные жировые выделения и излишки кератина, закрывающего поры и служащие причиной образования комедонов и угревой сыпи, кожу необходимо хорошо распарить. Поэтому особенно эффективно применение аппарата во время принятия горячей ванны или после парной, когда при распаривании кожи примерно в течение 8-ми минут начинается потоотделение и активное раскрытие пор. Мы рекомендуем проводить процедуры распаривания при помощи высокоэффективной паровой сауны для лица Gezatone.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется проводить процедуру чистки 2-3 раза в неделю (или один раз в 3 дня).

Если Ваша кожа относится к проблемной, следует увеличить время распаривания до 10-ти минут. Если у Вас сухой или чувствительный тип кожи, время распаривания следует сократить до 5-ти минут, а количество процедур - до одного раза в 7-10 дней.

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед использованием аппарата убедитесь, что крышка отсека питания плотно установлена на свое место. Перед снятием крышки насухо протрите аппарат мягкой тканью или салфеткой.

Не разбирайте корпус аппарата! Не снимайте защитные резиновые прокладки и не удаляйте с них специальную смазку!

Не применяйте для промывки насоса и очистки корпуса аппарата спирт, органические растворители или бензин.

## ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСТКИ

Выполнение данного раздела возможно только при полностью готовом аппарате к работе.

### Убедитесь, что:

- Батареи питания исправны и правильно установлены
- Крышка отсека питания плотно зафиксирована
- Основание приемного контейнера плотно установлено на приемную базу
- Прозрачная крышка со всасывающей насадкой зафиксирована на основании приемного контейнера (фиксация – поворот по часовой стрелке, снятие – поворот против часовой стрелки).



рис. 3



рис. 4

1. Обильно нанесите на лицо очищающую пенку, мусс или лосьон.
2. Включите аппарат.
3. Проведите тщательную чистку носа и прилегающих участков. Выполняйте процедуру чистки согласно Рис. 3, перемещая аппарат равномерными и повторяющимися движениями по массажным линиям лица. Оптимальное время обработки этих участков составляет примерно 1 минуту.
4. Повторяйте нанесение очищающих средств на кожу по мере их удаления аппаратом.
5. При заполнении приемного контейнера аппарата и во избежание выброса излишка жидкости через выпускное отверстие периодически выключайте аппарат, снимайте верхнюю прозрачную крышку контейнера и сливайте содержимое.

### Внимание!

Не применяйте аппарат вокруг линии глаз и по линии роста волос, Рис. 4.

Во избежание появления красных следов категорически не рекомендуется задерживать работающий аппарат на одном участке кожи более 2-х секунд. Выполняйте не более 3-5 проходов (в зависимости от степени загрязнения пор) по одной и той же области.

Следите за наполнением приемного контейнера. При его переполнении возможен выброс собранной в контейнере жидкости через отверстие для выпуска воздуха.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку аппарата необходимо выполнять сразу же после каждого его использования, придерживаясь следующей последовательности:

### 1. Приемный контейнер

Снимите приемный контейнер с переходной базы аппарата и разберите его повернув прозрачную крышку по часовой стрелке относительно основания. Тщательно промойте крышку и основание в теплой мыльной воде. Допускается стерилизация частей контейнера в чистой кипящей воде или паром с температурой не выше 120°C. Удалите остатки воды с частей при помощи мягкой ткани или салфетки, высушите и уберите на хранение.

### 2. Промывка насоса

Убедитесь, что крышка отсека питания плотно зафиксирована. Включите аппарат и погрузите входное отверстие в емкость с чистой теплой водой (температура 40-50°C).

Для полной промывки насоса достаточно 5 секунд. При сильном загрязнении повторяйте 5-ти секундные циклы промывки, пока выбрасываемая вода не будет оставаться чистой. После завершения промывки включите аппарат на воздухе на 10-15 секунд для удаления воды из насоса.

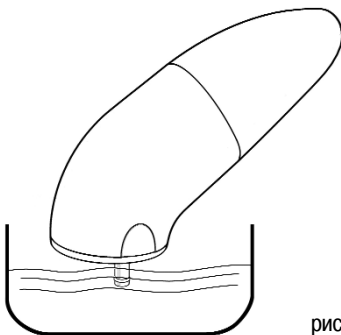


рис. 5

### 3. Очистка корпуса

В процессе эксплуатации необходимо периодически проводить очистку корпуса аппарата с помощью мягкой ткани, слегка смоченной теплой водой. Допускается использование мыла или нейтрального моющего средства.

**Внимание:** Храните аппарат только в чистом и сухом состоянии. При длительном хранении вынимайте батареи питания и защищайте аппарат от попадания пыли. При замене батарей питания проводите визуальный осмотр состояния резиновых уплотнителей. Не удаляйте защитную смазку с уплотнителей!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Создаваемое разрежение:	55 кПа
Питание аппарата:	DC 3 В, 500 мА (две щелочные батареи 1.5 В размера АА)
Продолжительность работы от батарей:	120 ... 180 минут
Диапазон рабочих температур:	+15 ... 35°C
Вес:	145 г (без батарей питания)
Габаритные размеры:	175 x 42 x 47 мм

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Условия гарантийного обслуживания:

1. Торговая организация гарантирует исправность, отсутствие механических повреждений и полную комплектность изделия на момент продажи.
2. Сервисный центр действует в рамках и на основании законодательства Российской Федерации, а именно:
  - Гражданского Кодекса РФ;
  - Закона о защите прав потребителей;
  - Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 г. N 1222.
3. Гарантийный срок на материалы, производственные и функциональные дефекты изделия составляет 12 календарных месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем всех положений, изложенных в Инструкции по эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы: электроды, эластичные ремни, элементы питания и т.д.
4. Претензии по изделию необходимо предъявлять непосредственно в уполномоченный сервисный центр. Сервисный центр, на основании договора с продавцом, компетентен давать заключение о причине и характере неисправности. Замена изделия производится только в случае, если оно не может быть отремонтировано.
5. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно.
6. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия и может достигать до 20 календарных дней с момента обращения.
7. Торговая организация несёт ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, заплаченной покупателем за данное изделие.

### Гарантия на изделие не действует в следующих случаях:

- гарантийный талон неправильно заполнен или подделан;
- серийный номер (если он предусмотрен для данного изделия) поврежден или удален;
- отсутствуют товарно-финансовые документы (кассовый чек, товарная накладная), подтверждающие факт покупки;
- производилось вскрытие или ремонт изделия покупателем или неуполномоченным сервисным центром;
- недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или транспортировки изделия, установленных нормативной и технической документацией на него, с указанием конкретных норм этой документации, которые нарушены;
- попадание в изделие посторонних предметов или жидкостей;
- наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или при транспортировке изделия;
- компонент или аксессуар является быстро изнашиваемым (электродные накладки, эластичные ремни);
- дефект является результатом естественного износа (сильное внешнее или внутреннее загрязнение, следы коррозии);
- повреждения вызваны независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения питающей сети, природные явления или стихийные бедствия, пожар, действия животных, насекомых и т.п.;
- недостатки обнаружены покупателем, и претензия заявлена после истечения гарантийного срока или иного установленного законодательством РФ срока для обнаружения недостатков изделия;
- покупатель использовал изделие не для личных (бытовых нужд), а в коммерческих целях, в целях извлечения прибыли, кроме случаев, когда эти цели предусмотрены технической и нормативной документацией на изделие.

### Порядок возврата неисправного оборудования:

Неисправное изделие принимается только в чистом виде и полностью комплектным, в оригинальной упаковке, при наличии правильно заполненного гарантийного талона и товарно-финансовых документов (кассового чека магазина, товарной накладной).

**Наименование изделия:** Вакуумный аппарат для влажной чистки кожи Gezatone SUPER WET CLEANER

**Дата продажи:** «    »                    200    

**Торговая организация:** \_\_\_\_\_

**Подпись продавца:** \_\_\_\_\_      **Штамп магазина:**

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду и комплектации претензий нет.

**Подпись покупателя:** \_\_\_\_\_

### Пункты приема в сервисное обслуживание:

г. Москва, ул. Петрозаводская, 11, корп.2., тел. (495) 105 77 34. E-mail: support@gezatone.ru  
г. Санкт-Петербург, тел.: (812) 970 03 75  
г. Екатеринбург, тел.: (343) 268 70 27



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.