

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Массажер для груди LuazON увеличит грудь без дорогостоящих пластических операций, а также создаст красивую форму.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- воздействия на биологически активные точки, создает красивую форму;
- сохраняет упругость;
- восстанавливает форму груди после беременности и кормления грудью;
- предотвращает растяжки и обвисание груди;
- улучшает кровообращение;
- улучшает структуру клеток молочной железы;
- стимуляция и электромассаж приводят к выделению особых гормонов молодости;
- профилактика возрастных изменений;
- подходит для груди любого размера;
- работа при помощи пульта управления;
- световой индикатор работы;
- 13 уровней интенсивности;
- 10 режимов работы;
- работа от 3 батареек AAA;
- материал корпуса: термостойкий пластик.

Комплектация: массажер для груди, пульт управления, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не изменяйте и не ремонтируйте прибор. В случае каких-либо проблем с устройством воспользуйтесь услугами авторизованного сервисного центра.
- Никогда не погружайте основной корпус в воду или другую жидкость, не помещайте в посудомоечную машину. При чистке прибор не должен контактировать с водой.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Никогда не оставляйте прибор на влажной поверхности или ткани.
- Проконсультируйтесь с врачом, есть ли у вас противопоказания.
- Не проводите процедуру на воспаленной коже.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Не пользуйтесь прибором при наличии каких-либо повреждений.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.
- Не храните аппарат рядом с нагревательными приборами или в местах с повышенной влажностью.
- Всегда отключайте массажер после использования.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте отсек для батареек на задней части корпуса массажера и вставьте 3 батарейки AAA, соблюдая полярность.
- Используйте небольшое количество геля для проведения процедур. Нанесите гель на патчи и приложите их на грудь, зафиксировав бюстгальтером.
- Соедините гнездо пульта управления и кабель с патчами.
- Нажмите кнопку включения и выберите уровень интенсивности, используя кнопки 2 и 3. Делайте массаж, используя комфортный уровень интенсивности.

- Чередуйте 10 режимов работы для большей эффективности процедур. Для этого выберите режим при помощи кнопок 4 и 5.
- Для получения лучшего результата рекомендуется использовать массажер по 15 минут ежедневно (при необходимости 2 раза в день), накладывая патчи, как показано на схеме.
- Уделяйте по 5 минут каждому из положений патчей на схеме поочередно. Сначала приложите патчи выше уровня сосков [6], затем переместите их под грудь [7], а в завершении массажа следуйте схеме [8].

ЧИСТКА И УХОД

- Корпус массажера и блока управления рекомендуется протирать мягкой фланелевой тканью.
- При сильном загрязнении можно слегка увлажнить ткань в мыльном растворе. Запрещается использовать растворители! Берегите аппарат от попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса.
- Аппарат следует хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и пыли месте
- Вынимайте батареи питания из блока управления перед длительными перерывами в использовании массажера.

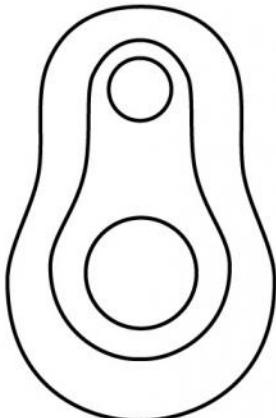

1. Кнопка включения / выключения
2. Уменьшение интенсивности
3. Увеличение интенсивности
4. Переключение на предыдущий режим
5. Переключение на следующий режим

