


## Mi Electric Toothbrush Руководство пользователя



### G. Периодически заряжайте устройство.

- После зарядки, док-станция электризуется, индикатор мощности зубной щетки может реагировать следующим образом:
  - 100% стабильно сине-зеленый
  - 100%-60% мигает сине-зеленым
  - 60%-20% мигает оранжевым
  - <20% мигает красным
- Чтобы полностью зарядить устройство, вам потребуется 12 часов (индикатор батареи загорится красным цветом)
- Если соединение с Bluetooth стабильно во время зарядки, то индикатор Bluetooth будет мигать три раза.

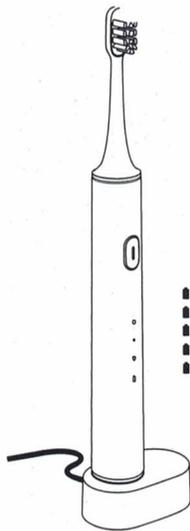

- Соединение с Bluetooth
- 100%: стабильно сине-зеленый
- 100%-60%: мигает сине-зеленым
- 60%-20%: мигает оранжевым
- 20%-0%: мигает красным

Электрическая щетка Mi Electric Toothbrush. Инструкция пользователя. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!  
При первом использовании электрической щетки, вы можете почувствовать зуд или у вас могут начать кровоточить десна. Связано это с тем, что десна не привыкли к такой эффективной чистке зубов. Рекомендуется использовать режим «фаворит». Дискомфорт при чистке зубов проходит через 1-2 недели. Если дискомфорт не проходит через 2 недели, прекратите использование данной щетки и проконсультируйтесь со стоматологом.  
\*Внимание:  
1. При прохождении стоматологического лечения, ортодантии или при наличии зубных имплантов, необходимо использовать данную электрическую щетку под строгим контролем вашего лечащего врача.  
2. Электрическая зубная щетка соответствует нормам для электромагнитных устройств. При наличии кардиостимулятора или других имплантируемых устройств, необходимо проконсультироваться с доктором или производителем данного имплантированного устройства.  
3. Это продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте данный продукт для других целей. Если вы испытываете боль или дискомфорт при использовании, немедленно прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь к врачу.

- \*Запрещено:  
1. Не погружайте зарядную док-станцию в воду или любую другую жидкость  
2. После чистки зубной щетки, проверьте, что вилка зарядного устройства док-станции полностью сухая, а затем подключите её к источнику питания.  
3. Этот продукт содержит встроенный аккумулятор. Не подносите устройство близко к огню или к местам с высокой температурой.  
4. Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать изделие.  
\*Важно:  
1. Перед использованием, проверьте устройство на наличие повреждений. Если устройство повреждено или сломано, не используйте его.  
2. Перед подключением к источнику питания, проверьте, соответствует ли локальный источник питания необходимой норме напряжения, указанной на продукте.  
3. Если есть какие-либо повреждения на зарядной док-станции, не используйте её.  
4. Если данный продукт (включая ручку или насадку зубной щетки) поврежден, прекратите его эксплуатацию.  
5. Не используйте зарядную док-станцию в условиях, где существует вероятность высоких температур.  
6. Не используйте электрическую зубную щетку, когда принимаете душ.  
\*Подсказки  
1. Не передавайте насадку на зубную щетку другим лицам.  
2. Не обматывайте шнур питания вокруг зарядной док-станции, когда она подключена к источнику питания.  
3. Не кладите металлические предметы на зарядную док-станцию, когда она подключена к источнику питания.

### Установка MI Home APP

#### A. Быстрая установка

Контролируйте ваше устройство и синхронизируйте его с другими устройствами через приложение Mi Home

1. Загрузите и установите приложение Mi Home APP  
Отсканируйте QR код и зайдите в App store, чтобы загрузить и установить приложение Mi Home App




2. Добавьте устройство  
Откройте «Мое устройство» в приложении Mi Home App, нажмите + в верхней части экрана и следуйте инструкциям, чтобы добавить устройство.

3. Покупайте больше продуктов.  
Чтобы купить больше умных и качественных продуктов, пожалуйста, перейдите в приложение Mi Home App



## 1. Обзор продукта

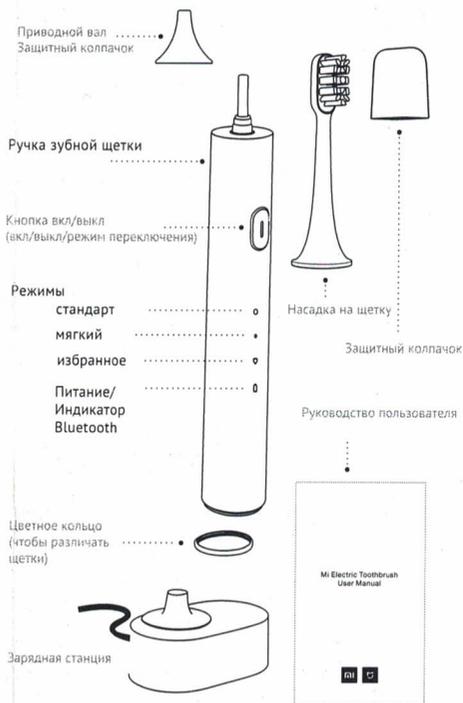

### б. Привязка устройства

1. Включите функцию Bluetooth на смартфоне. Поднесите зубную щетку поближе к смартфону
2. Следуйте инструкциям в приложении Mi Home App, чтобы привязать устройство. Добавьте устройство в «Мои устройства»
3. Выберите устройство. Нажмите «сканировать устройство». Выберите «Mi Electric Toothbrush».
4. Нажимайте на кнопки, следуя подсказкам. Затем зажмите кнопку питания в течении 3 секунд, чтобы подтвердить соединение.

\*Зубная щетка не будет работать, если она соединена со смартфоном через Bluetooth. Зубная щетка не сможет подключиться к смартфону через Bluetooth, во время вибрации.




## 2. Как использовать зубную щетку

### Подсказка

При первом использовании электрической щетки, вы можете почувствовать зуд или у вас могут начать кровоточить десна. Связано это с тем, что десна не привыкли к такой эффективной чистке зубов. Рекомендуется использовать режим «фаворит». Дискомфорт при чистке зубов проходит через 1-2 недели. Если дискомфорт не проходит через 2 недели, прекратите использование данной щетки и проконсультируйтесь со стоматологом.

### А. Установка насадки

Закрепите насадку на ручке зубной щетки и оставьте небольшой разъем между ними. (Во время высокочастотной вибрации, при работе мотора, такой разъем позволит насадке не соприкасаться с ручкой зубной щетки.)

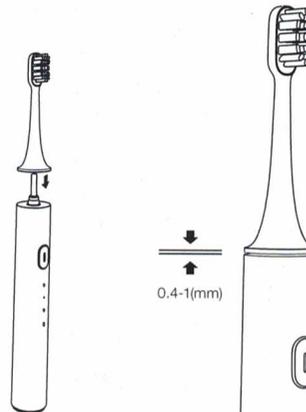

### с. Синхронизация данных

Установите Mi Home App, зарегистрируйте Mi account и войдите в приложение. Добавьте зубную щетку в «Мои устройства» и сохраните устройство в списке устройств.




### d. Просмотр отчета и настройка функций

- Включите режим «избранное»
- Данные о чистке и анализ
- Время замены насадки

## в. Установка цветного кольца

- Меняйте кольца разных цветов по своему вкусу
- Замена цветного кольца: Возьмите зубную щетку левой рукой, нажмите на заднюю (текстурированную) часть зубной щетки, нажмите на отверстие для воздуха правым указательным пальцем, вставьте ноготь большого пальца в зазор между цветным кольцом и ручкой, слегка подцепите кольцо и потяните вверх.
- Установка цветного кольца: поверните кольцо стороной зажима и соедините кольцо с ручкой зубной щетки. Надавите на кольцо, чтобы закрепить его на ручке

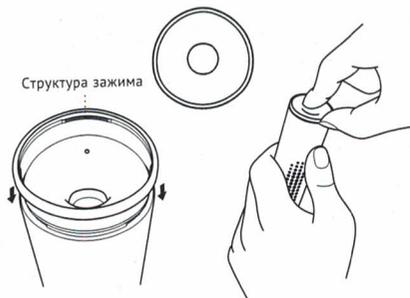

## с. Выдавить зубную пасту

Наночите насадку зубной щетки и выдавите небольшое количество зубной пасты на щетку.



## Защита окружающей среды

Перезаряжаемые литиевые батареи внутри продукта могут содержать опасные вещества. Перед тем как утилизировать электрическую зубную щетку, убедитесь, что вы изыли батарею из устройства, затем сдайте ее в один из специальных пунктов сбора и переработки бытовых отходов. Если вы не смогли изъять батарею самостоятельно, то обратитесь в сервисный центр нашей компании.

Изготовитель: Сюми Коммьюникэйшн Ко. ЛТД  
 Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, Пекин, Китай.  
 Цзянин Экономик энд Текноложикал Девелопмэнт Зоун, Нанкин, КНР, Китай. Произведено на заводе изготовителя в Китае.  
 Импортёр/Организация, принимающая претензии от потребителей: Группа компаний RDC GROUP, ООО «Мобилиди», 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, Бизнес центр «W Плаза» 1, 7 этаж, офис А709  
 Сайт: [www.mobilidi.com](http://www.mobilidi.com) E-mail: [info.ru@mobilidi.com](mailto:info.ru@mobilidi.com)  
 Соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Сертификат соответствия  
 Регистрационный номер ЕАЭС №ТС RU С-НК.АУ04.В.03349  
 Срок действия: 16.03.2018 - 15.03.2023  
 Сервисное обслуживание: ООО "Микстех" г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, строение 1-2, офис А110, БЦ «W Plaza».  
 Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте: [www.mi-shop.com/ru/service-centers](http://www.mi-shop.com/ru/service-centers)  
 Комплектация: зубная щётка, зарядное устройство, насадка зубной щётки, защитная крышка для насадки, руководство пользователя, гарантийный талон.  
 Гарантия: 6 месяцев. Срок службы: 12 месяцев.  
 Дата производства: 02/2018  
 Поддержка в России: [www.mi-shop.com/ru](http://www.mi-shop.com/ru)

## д. Выбрать режим.



- вкл/выкл/режим переключения
- Включение: Включите щетку коротким нажатием на кнопку
- Режим переключения: когда устройство включено, нажмите на кнопку питания, чтобы переключить режим
- Пауза: нажмите кнопку питания на 1 секунду, чтобы приостановить работу устройства. Устройство автоматически выключается, если его не использовать в течении 30 секунд, после включения паузы.
- Выключение: Когда устройство включено, нажмите на режим «Избранное» , а затем снова нажмите на этот режим, чтобы выключить устройство.
- При возникновении каких-либо проблем, нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 12 секунд, чтобы восстановить заводские параметры (для предотвращения ошибок данных, чтобы синхронизировать данные на смартфон через Bluetooth)

## е. Правильно чистите зубы.

- Медленно перемещайте щетку, сохраняя угол 45° между щетинками зубной щетки и деснами. Во время чистки зубов, вы можете переключать режимы, нажимая на кнопку питания.
- Зубная щетка перестает вибрировать через каждые 30 секунд, чтобы напомнить вам, что пора изменить место и направление чистки зубов.
- Зубная щетка автоматически прекращает свою работу, когда заканчивается время чистки (вы можете выбрать время чистки в вашем приложении)





## Устранение неисправностей

Ошибка	Причина возникновения
Устройство не получается включить	Устройство заряжается. Устройство подключено к Bluetooth. Низкий уровень заряда батареи.
Не получается установить приводной вал	В отверстие зубной щетки попали посторонние предметы. Зубная паста или другие вещества попали в место установки приводного вала. Насадка зубной щетки не является оригинальной для зубных щеток Mi.
Батарея быстро разряжается	Устройство долгое время было подключено к Bluetooth. Устройство используется слишком часто.
Слабая вибрация	Насадка на зубную щетку установлена неверно. Между ручкой и насадкой зубной щетки находится посторонний предмет.
Устройство не синхронизируется с приложением	Отключен Bluetooth на вашем телефоне. Зубная щетка находится далеко от телефона. Зубная щетка включена и находится в состоянии вибрации.

#### f. Чистка зубной насадки

После чистки зубов, снимите насадку и помойте ее под проточной водой  
После чистки, наденьте защитный колпачок на насадку, чтобы избежать попадания грязи и пыли

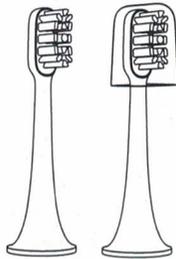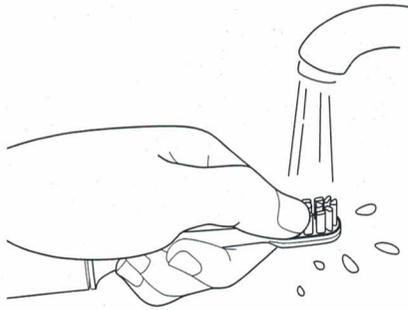

\*Стоматологи рекомендуют  
менять насадку каждые  
три месяца

#### Список проблем при эксплуатации устройства

Проблема при эксплуатации	
Mi Electric Toothbrush	1. Возникла проблема при включении и выключении устройства
	2. Устройство работает некорректно
	3. Устройство не синхронизируется с приложением по Bluetooth
	4. Ошибки при зарядке устройства
	5. Индикатор отключен

Пункты, на которые не распространяются условия гарантии:

1. Эта гарантия применяется только при условии правильного и бережного использования устройства и не действует в случае повреждения или неправильного, неаккуратного употребления.
2. Истек срок действия гарантии
3. Продукт поврежден вследствие непреодолимой силы
4. Гарантия не покрывает данный вид поломки устройства
5. Повреждение возникло в результате неправильной эксплуатации устройства и не соблюдение пунктов, которые описаны в таблице выше.