



GÉZATONE

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ AMG709PRO

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

ИК ПРОГРЕВ СТОП



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МАССАЖЕР AMG709PRO УМЕНЬШАЕТ ОТЕКИ, ТЯЖЕСТЬ И НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЗВРАЩАЕТ КОМФОРТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И ЧУВСТВО ЛЕГКОСТИ В НОГАХ, СНИМАЕТ НАРЯЖЕНИЕ МЫШЦ БЕДЕР, ГОЛЕНЕЙ И СТОП, А ТАКЖЕ БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ НА ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, УСТРАНЯЕТ УСТАЛОСТЬ И СТРЕСС.



»» НОШЕНИЕ НЕУДОБНОЙ, ТЕСНОЙ ОБУВИ И ОБУВИ НА ШПИЛЬКЕ, СПАЗМЫ, ЛОМОТА В НОГАХ



»» ОТЕКИ, ОНЕМЕНИЕ НОГ ПРИ «СИДЯЧЕЙ» РАБОТЕ, МАЛОПОДВИЖНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ



»» ОТЕКИ, БОЛЬ, ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ, СВЯЗАННЫЕ СО СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ



»» БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ НА НОГИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РАСТЯЖЕНИЙ



»» ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗА НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ВАРИКОЗА



»» ПОВЫШЕННАЯ НАГРУЗКА НА НОГИ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



ПРЕССОТЕРАПИЯ – АППАРАТНЫЙ МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТКАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА, ПОДАВАЕМЫМ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПРЕССИИ В ОБЛАСТИ БЕДЕР, ГОЛЕНЕЙ, ЛОДЫЖЕК И СТОП АКТИВИРУЕТСЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ КРОВИ И ЛИМФЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ, СПАЗМОВ МЫШЦ И ДИСКОМФОРТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ В НОГАХ.

ПРЕССОТЕРАПИЯ

Помимо положительного действия на кожу, мышцы и сосуды, очищает организм от токсинов и шлаков и укрепляет иммунитет, а также помогает избавиться от общей усталости/



ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ СТОП ОКАЗЫВАЕТ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ И СНИЖАЕТ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.

МЯГКОЕ ТЕПЛО УСТРАНЯЕТ УСТАЛОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ В ОБЛАСТИ СТОП, СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И АКТИВИРУЕТ ДРЕНАЖ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ОТЕКОВ.

ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ СТОП

ИК тепло повышает эластичность тканей, что необходимо для восстановления связок и мышц, а также для подготовки к тренировкам или нагрузкам.

ПРЕССОТЕРАПИЯ

ЭФФЕКТЫ

ЛИМФОДРЕНАЖ



ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ И ШЛАКОВ



УКРЕПЛЕНИЕ СОСУДОВ,
ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗА



УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ



УСТРАНЕНИЕ ТЯЖЕСТИ В НОГАХ



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ



ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- МАССАЖЕР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ.
- РЕЗУЛЬТАТ ОЩУЩАЕТСЯ ПОСЛЕ ОДНОГО СЕАНСА МАССАЖА.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО ЛИМФОДРЕНАЖНОГО МАССАЖА НОГ ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВСЕ ЗОНЫ: СТОПЫ, ГОЛЕНИ И БЕДРА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА СТОП ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОЗВОЛИТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЩУЩЕНИЯ «ХОЛОДНЫХ НОГ»
- ТРИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ПОДОБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЙ УРОВЕНЬ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ТРИ РЕЖИМА ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА В СОЧЕТАНИИ С ИНФРАКРАСНЫМ ПРОГРЕВОМ СТОП ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА И РЕЛАКСАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО НОГАМ, НО И ВСЕМУ ТЕЛУ.

3

3 УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ
ИК ПРОГРЕВА

3


3 РЕЖИМА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



ДЛЯ ЖЕНЩИН
И МУЖЧИН

арт. 1301261

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

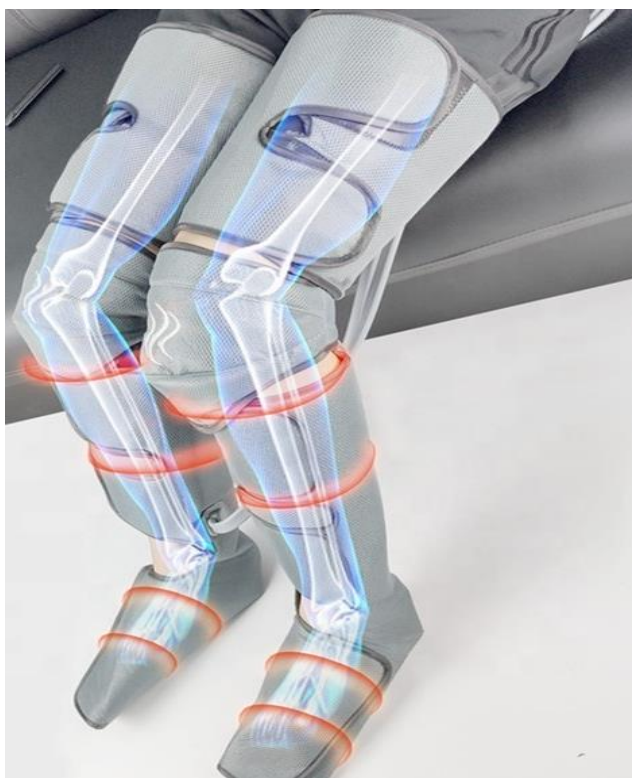

- ПРОГРЕВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ЗОНЕ СТОПЫ. ФУНКЦИЯ ИК ПРОГРЕВА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ И ВЫКЛЮЧАТЬСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ.
- СМАРТ – ТАЙМЕР: ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ МАССАЖЕР ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
- ПРИБОР ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ: ВСЕГО ЗА 20 МИНУТ СОКРАЩАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ И ОЩУЩАЕТСЯ ЛЕГКОСТЬ В НОГАХ.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР НА РАБОТЕ, ДОМА И В ПОЕЗДКЕ ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ НА ПОСЕЩЕНИИ МАССАЖИСТА
- ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. КУРС ЛИМФОДРЕНАЖНОГО МАССАЖА В САЛОНЕ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТОИМОСТЬ МАССАЖЕРА.
- УДОБНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТАЙМЕР



ВСЕГО
20 МИНУТ В ДЕНЬ



ОБЩЕЕ
РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

ТРИ РЕЖИМА ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА В СОЧЕТАНИИ С ИНФРАКРАСНЫМ ПРОГРЕВОМ СТОП ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА И РЕЛАКСАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО НОГАМ, НО И ВСЕМУ ТЕЛУ.

1

РЕЖИМ 1
МАССАЖ СТУПНЕЙ,
ГОЛЕНЕЙ И БЁДЕР

ВЫПОЛНЯЕТСЯ РИТМИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ СТУПНЕЙ, ГОЛЕНЕЙ И БЕДЕР, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ВСЮ НОГУ ПОЛНОСТЬЮ. ТРИ РЕЖИМА ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ СИЛУ МАССАЖА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ.

2

РЕЖИМ 2
МАССАЖ ТОЛЬКО ГОЛЕНЕЙ
И БЕДЕР

КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ ОБЛАСТИ ГОЛЕНЕЙ И БЕДЕР, ЧТО ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНО ПОСЛЕ ПОВЫШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И СПОСОБСТВУЕТ УСТРАНЕНИЮ ЛОМОТЫ В МЫШЦАХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО ИЗ ТРЕХ УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ КОМФОРТНЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

3

РЕЖИМ 3
МАССАЖ ТОЛЬКО
СТУПНЕЙ

ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА ОБЛАСТЬ СТУПНЕЙ, УСТРАНЯЯ УСТАЛОСТЬ ПОСЛЕ ТРУДНОГО ДНЯ. ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РЕЖИМА ПРИ НОШЕНИИ ОБУВИ НА ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ, А ТАКЖЕ УЗКОЙ ИЛИ НЕУДОБНОЙ ОБУВИ. МОЖНО ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ТРЕХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ.



ЛЮБОЙ ИЗ РЕЖИМОВ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНЕН ИНФРАКРАСНЫМ ТЕПЛОМ В ОБЛАСТИ СТОП.



ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



арт. 1301261

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВСЕГО 20 МИНУТ В ДЕНЬ С МАССАЖЕРОМ AMG709PRO ПОДАРЯТ НОГАМ ЛЕГКОСТЬ



УМЕНЬШЕНИЕ
ТЯЖЕСТИ, УСТАЛОСТИ
И ЛОМОТЫ В НОГАХ




СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



ПРОФИЛАКТИКА
ВАРИКОЗА



ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ
В НОГАХ

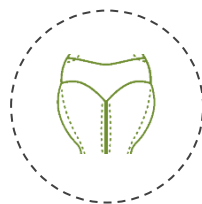

УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ БЕДЕР



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ



УСТРАНЕНИЕ
СКОВАННОСТИ В
МЫШЦАХ И СПАЗМА



УСТРАНЕНИЕ
СТРЕССА И ОБЩЕЙ
УСТАЛОСТИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



НЕ спите во время работы массажера

- БЕРЕМЕННОСТЬ, ЛАКТАЦИЯ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ВАРИКОЗ (КРОМЕ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ), СКЛОННОСТЬ К ТРОМБОЗАМ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ПАТОЛОГИИ КРОВИ, ХРУПКОСТЬ СОСУДОВ.
- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИМФОУЗЛАХ, ПАТОЛОГИИ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
- НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИСКУССТВЕННЫХ ЧАСТЕЙ НОГ, ИМПЛАНТАТОВ ИЛИ ШТИФТОВ
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТАДИЯХ II В И III, ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, НАРУШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР
- ДИСФУНКЦИИ СУСТАВОВ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- ТУБЕРКУЛЕЗ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- ОСТРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

арт. 1301261



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАССАЖНЫЕ МАНЖЕТЫ – 2

БЛОК ПИТАНИЯ – 1

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ – 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1

БЛОК ПИТАНИЯ: VAC 100-240 В 50/60 Гц; VDC выход: 12В 1,5А

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 18 Вт

Давление воздуха при высокой интенсивности: 55 КПа

Давление воздуха при средней интенсивности: 51 КПа

Давление воздуха при низкой интенсивности: 35 КПа


РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: +10 + 40°C при относительной влажности
30-85%

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ: 340x250x170



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

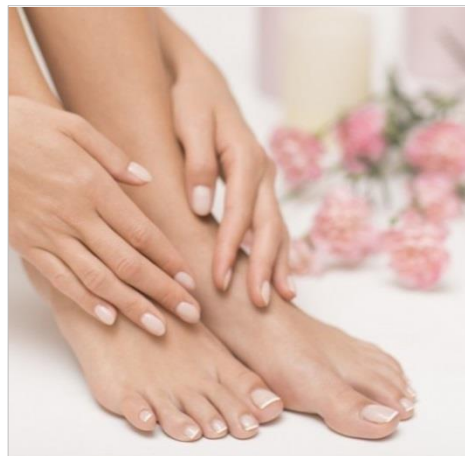

Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>