

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Постукивающий точечный массажер LuazON подойдет для снятия стресса и расслабления мышц, он быстро приведет в тонус организм после насыщенного трудового дня. Подойдет не только для массажа шеи и плеч, но и для массажа поясницы, бедер и других групп мышц. Массажер позволяет вам регулировать силу и ритмичность массажного воздействия. Изготовлен с учетом анатомии человеческого тела, поэтому его легко закрепить на массируемом участке. Оснащен таймером автоотключения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- автоотключение;
- пульт управления;
- 99 режимов работы;
- 20 уровней интенсивности;
- напряжение: 220 В;
- материал: искусственная кожа.

Комплектация: массажер электрический для шеи и плеч, инструкция, гарантийный талон.


Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной другой жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Берегите прибор от падений на твердые поверхности.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными умственными и физическими возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений не включайте его в розетку.
- Не используйте прибор на участках тела с нарушением кожных покровов.
- Если вы принимаете какие-то медикаменты или имеете серьезные заболевания, то перед применением прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

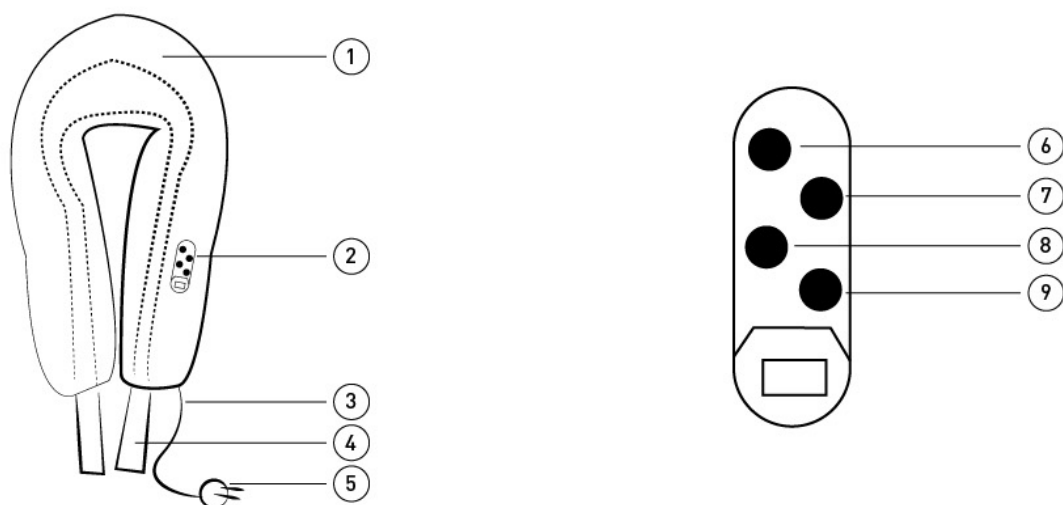

1. Основная часть массажера
2. Панель управления
3. Кабель
4. Ремни
5. Вилка

6. Кнопка уменьшения интенсивности массажа
7. Кнопка усиления интенсивности массажа
8. Кнопка выбора режима массажа
9. Вкл. / Выкл.

Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети соответствует его рабочему напряжению.

1. Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку включения (9) на массажере.
2. Зафиксируйте массажер на теле с помощью заклепок или удерживайте его вручную (рис.1).

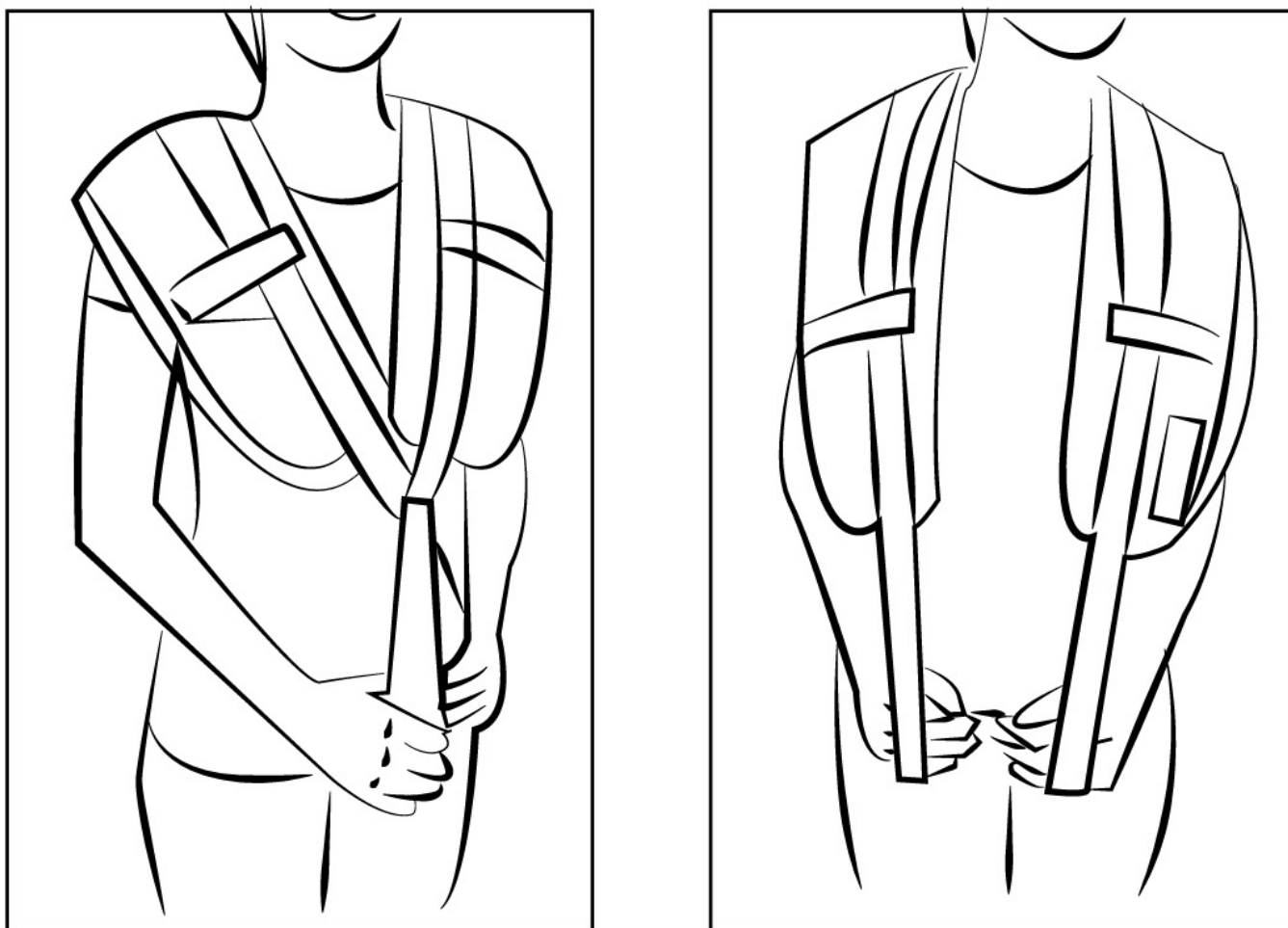


Рис. 1

3. С помощью кнопки (8) выберите одну из программ массажа.
4. С помощью кнопок (6) и (7) отрегулируйте интенсивность массажа. Интенсивность воздействия имеет 15 уровней.
5. Через некоторое время массажер отключится автоматически.

После использования массажера отключите его от сети.

Внимание!

Прекратите массаж, если чувствуете недомогание или дискомфорт.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Выполняйте массаж не более 10 мин. После использования прибора необходимо сделать перерыв на 30 мин.

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте массажер снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки химически активные или абразивные чистящие средства.