



Аппарат косметический Bio Wave Gezatone m 920

Bio
WAVE

МИКРОТОКИ


• инструкция по эксплуатации •

Мы благодарим Вас за приобретение косметического аппарата Gezatone Bio Wave модель m 920 для комплексного интенсивного ухода за кожей лица в домашних условиях.

Добро пожаловать
в мир передовых технологий
для красоты и здоровья Gezatone!



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

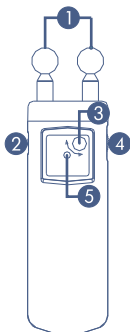

1. Контактные электроды.

Приложите электроды к коже перпендикулярно к морщине. Выполняйте круговые движения.

2. Выключатель.


Включите аппарат, установив движок выключателя вверх. При включении/выключении аппарата загорается/гаснет световой индикатор.

3. Индикатор интенсивности воздействия:

1-минимальный уровень воздействия, 5-максимальный.


4. Регулятор интенсивности воздействия.

Для увеличения интенсивности поворачивайте регулятор по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки.

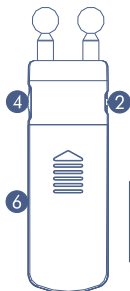

5. Световой индикатор работы аппарата.

При корректной работе аппарата индикатор мигает.

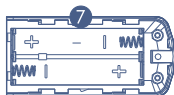


6. Батарейный отсек.

Используйте батареи типа AAA 1.5В.

7. Батарейный отсек.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Микротоки – одна из самых популярных процедур в косметологии. Микротоки позволяют мягко, деликатно и очень эффективно воздействовать на функциональную активность клеток кожи, мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды. Для микротоковой стимуляции используются токи низкой частоты, восстанавливающие состояние всех слоев кожи.

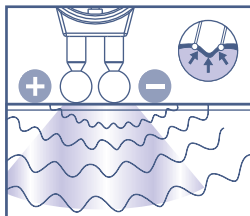

Микротоки оказывают на мышцы лица стимулирующее и укрепляющее воздействие, восстанавливают утраченный мышечный тонус, корректируют овал лица, контур бровей, подтягивают уголки губ, устраняют обвисание век, ликвидируют «второй подбородок». Работающие мышцы улучшают приток свежей артериальной крови к коже лица, устраняют застойные явления, «мешки» под глазами. Процедура микротоковой стимуляции получила название «безоперационного лифтинга», т.к. эффективно и быстро способствует восстановлению овала лица, укреплению и омоложению кожи лица. Процедура выполняется электродами – шариками, к которым приложено переменное электрическое напряжение.

Действие аппарата Gezatone Bio Wave основано на принципе генерации биоэлектрических импульсов, по своим характеристикам близким к биоэлектрическим импульсам клеток кожи человека. Благодаря этому, воздействие Bio Wave благотворно влияет на регенерацию клеток кожи, восстанавливая и поддерживая их жизнедеятельность, в результате кожа обретает тонус и упругость, гладкость, свежесть, сияет красотой и здоровьем.

ЛИМФОДРЕНАЖ И ТОНИЗАЦИЯ МЫШЦ

Процедура заключается в воздействии стимулирующими микротоками на участки с выраженным «птозом», т.е с обвисанием контуров лица, для профилактики изменения контура лица. Чаще всего обвисание формируется на нижней части лица и шеи (овал лица, шея, щеки, уголки губ, подбородок). В верхней части лица «птозу» подвержены веки и линия бровей.

Процедуры лимфодренажа и тонизации мышц могут выполняться, через день по 15-20 мин. в день. Рекомендуемый курс 15-20 процедур. Далее выполняйте поддерживающие процедуры 1-2 раза в неделю.



Мышцы лица ослабли и растянулись. Лицо осунулось и выглядит угрюмо.



Аппарат Bio Wave стимулирует мышцы лица, возвращая им упругость и эластичность



Тонизированные мышцы улучшают овал лица, возвращая ему молодость и красоту.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Злокачественные онкологические заболевания.
- Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы с нарушением ритма или высокой степенью недостаточности кровообращения.
- Ношение кардиостимуляторов.
- Эпилепсия.
- Беременность.
- Нарушение целостности кожных покровов
- Острые гнойные воспалительные процессы на лице.

- Заболевания лицевых нервов.
- Зоны, в которые введены филлеры, ботокс, золотые нити в процедуре не затрагивать.
- Доброкачественные образования на лице (родимые пятна, папилломы, невусные родинки) в процедуре не затрагивать. При проведении процедур не затрагиваются зоны глазных
- орбит, слизистые оболочки, зона проекции щитовидной железы (средняя часть шеи, ниже кадыка).

ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРОЦЕДУРЕ

- 1** Снимите металлические украшения (серьги, цепочки и т. д); очистите кожу умыванием с использованием обезжиривающих косметических средств – лосьонов, пенки, выбранных по типу кожи; возможно использование легкого броссажа или ультразвукового пилинга;
- 2** Для очень сухой, обезвоженной кожи лица необходимо выполнить глубокое увлажнение кожи для восстановления ее токопроводящих свойств, для лица рекомендуется влажный компресс с минеральной водой на 5–10 минут;


Важно!

Для эффективного проведения процедуры микротоковой стимуляции необходимо использовать проводящий гель, сыворотки на водной основе или готовые маски с хорошей электропроводимостью. Нужно следить за тем, чтобы кожа лица оставалась влажной в течение всей процедуры. При необходимости можно добавить проводящий гель.


Если Вы, по каким-либо причинам, приостановили проведение массажа, перед возобновлением процедуры рекомендуется снизить интенсивность воздействия электродов на кожу. Это поможет избежать возможных дискомфортных ощущений в момент касания электродами. поверхности кожи электродами.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР


Продолжительность выполнения процедур: 15-20 минут

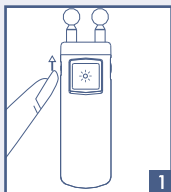


1 Включите аппарат, установив движок выключателя вверх. При включении аппарата замигает световой индикатор.

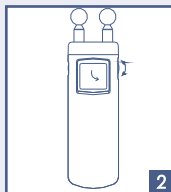

2 С помощью регулятора интенсивности установите необходимый уровень воздействия*.

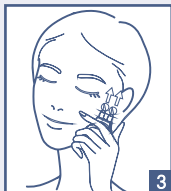

3 Электроды-шарики должны быть расположены над морщиной или перпендикулярно к морщине.

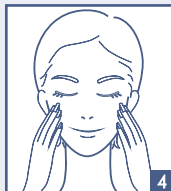

4 По завершении выполнения процедуры удалите остатки проводящего геля.

*Установите уровень воздействия 3. Закройте глаза и расположите электроды между бровями. Через 5 секунд Вы почувствуете, как микротоки воздействуют на мышцы лица. Ощущение должно быть приятным!

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 Для достижения наилучших результатов подтяжки мышц лица выполняйте медленные движения аппаратом вдоль массажных линий лица. Металлические электроды в этом случае располагаются вдоль мышц (на рисунках это соответствует положению вдоль стрелок).


2 Эффективная тонизация основана на легком деликатном стимулирующем массаже лицевых мышц и кожи. В случае появления дискомфортных ощущений или покалывания под электродами необходимо снизить интенсивность сигнала до минимума, добавить проводящий гель и постепенно увеличивать интенсивность.

«ЛИМФОДРЕНАЖ». Схема проведения процедуры.



1, 2, 3: устранение отеков, одуловатости лица

«ТОНИЗАЦИЯ МЫШЦ». Схема проведения процедуры.

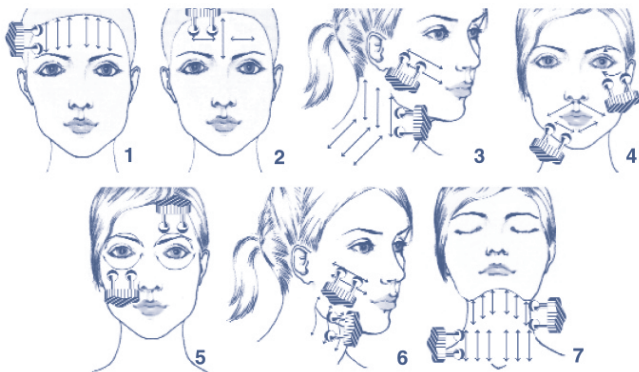

1. В области лба;
2. В области переносицы и между бровями;
3. В области шеи и мимических морщин - носогубных складок;
4. В области губ и «гусиных лапок» около глаз;
5. Верхнее и нижнее веки;
6. Щек и боковых сторон лица;
7. Область подбородка, устранение «второго подбородка», подтяжка мышц шеи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием аппарата
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!



Перед использованием аппарата рекомендуется проанализировать состояние кожи и мышечного тонуса Вашего лица и выбрать участки, нуждающиеся более всего в применении каждого из видов воздействия. Можно проконсультироваться с косметологом.

- Не оставляйте аппарат без присмотра. Храните аппарат в месте, недоступном для детей.
- Используйте аппарат перед зеркалом в положении стоя или сидя.
- Запрещается использовать аппарат рядом с водой (например, в ванной комнате, у бассейна). Корпус аппарата не является водонепроницаемым. Избегайте любого попадания влаги на или внутрь корпуса аппарата.
- Не используйте аппарат в помещениях с высоким уровнем влажности.
- Запрещается любое дальнейшее использование аппарата после попадания жидкости внутрь корпуса. Следует обратиться в сервисный центр для проверки и ремонта аппарата.
- Используйте с аппаратом только оригинальные аксессуары, изготовленные производителем.
- Аппаратом запрещено пользоваться детям, а также людям с физическими или умственными отклонениями.
- Берегите аппарат от падений и ударов.

УХОД ЗА АППАРАТОМ

После каждого применения тщательно удаляйте с поверхности активных электродов и корпуса аппарата остатки косметических средств (гелей, сывороток, готовых масок) увлажненной мягкой тканью или салфеткой, не оставляющими ворса.

Периодически протирайте корпус слегка влажной тканью, не оставляющей ворса. Запрещается погружать корпус аппарата в жидкость или мыть его под струей воды. Запрещается попадание любой жидкости внутрь корпуса аппарата. Запрещается использовать для очистки корпуса аппарата и электродов абразивные материалы, агрессивные жидкости и растворители (ацетон, эфир, бензин, керосин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания DC 3 В (2 батареи 1,5 В, типоразмера AAA)
- Потребляемая мощность: не более 0,09 Вт
- Амплитуда выходных импульсов: 1,2-12 В
- Диапазон допустимых температур воздуха: 5 °С -40 °С
- Допустимый уровень влажности воздуха: не более 80%
- Размеры упаковки 190 x 120 x 40 мм
- Масса в упаковке: 0,23 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат Gezatone Bio Wave, модель m 920..... 1 шт.
Инструкция по эксплуатации..... 1 шт.
Упаковочная коробка..... 1 шт.
Элементы питания в комплект не входят.

Аппарат косметический Bio Wave Gezatone m 920



GÉZA *tone*

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.