

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА ВИБРАЦИОННАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество пульсации: 8500 в минуту.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Степень защиты: IP67.
- Напряжение: 3 В (---).

Гарантия: 6 месяцев.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электрическая вибрационная зубная щетка.
- 4 сменные насадки.
- Подставка.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.


НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая зубная щетка предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для чистки зубов. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Чистящая головка.
2. Кнопка включения.
3. Корпус устройства.
4. Дополнительные насадки.
5. Подставка.
6. Батарейный отсек.

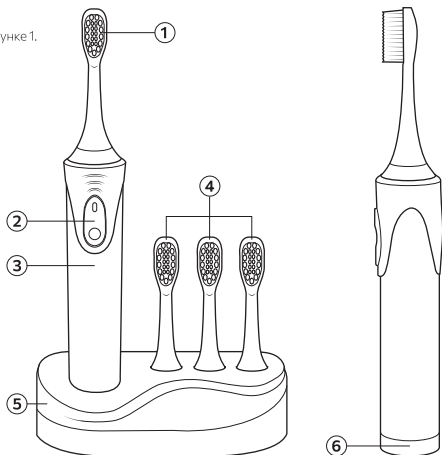

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку. Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10°C до +45°C

Относительная влажность: 10–80%

Температура хранения: от +5°C до +70°C

Относительная влажность при хранении: 10–80%

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке.

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Перевозить необходимо в вертикальном положении.

Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками.

Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя или опасности возгорания, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Избегайте ударов и падения устройства.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: Руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе эксплуатации

1. Откройте отсек для батареек и установите батарейки, соблюдая полярность.
2. Установите одну из четырех насадок входящих в комплект.
3. Намочите щетку и нанесите на нее любую зубную пасту. Во избежание разбрызгивания, приложите щетку к зубам, а затем включите устройство.
4. Медленно ведите щетку от зуба к зубу по краю десны, затрачивая по несколько секунд на поверхность каждого зуба.
5. Почистите одинаково все четверти челюсти. Не давите слишком сильно, щетка сама проделывает всю работу. Чистите как минимум 2 минуты, чтобы тщательно удалить налет.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении любых неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: YIWU ZHOUSIMA CRAFTS COMPANY LIMITED.

Адрес изготовителя: № 781, Cháozhōu, North Road, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай).

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.