


**С заботой
о твоём теле!**

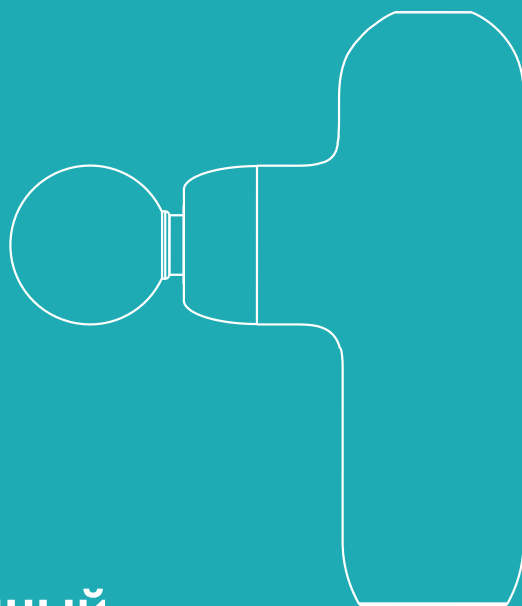

**Перкуссионный
массажер
KT-2966**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство массажера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

ПеркуSSIONный массажер КТ-2966 поможет избавиться от мышечной усталости, боли и спазмов. ПеркуSSIONный массажер использует ударную терапию для разминания мышц и фасций, увеличения притока крови к ним. Массажер может использоваться спортсменами перед, во время и после тренировок, поможет расслабить мышцы спины и шеи офисным работникам.

Ударный массажер позволяет восстановить свободу движений, избавиться от токсических продуктов обмена веществ и улучшает кровообращение. Прибор помогает подготовить мышцы к интенсивным нагрузкам, повысить эффективность тренировок, а также расслабить мышцы после тренировки. Глубокое ударное воздействие на мышечную ткань и фасции повышает мобильность и восстанавливает работу опорно-двигательного аппарата.

Под действием ударной вибрации активизируется кровообращение и насыщение тканей кислородом, улучшается лимфодренаж и выведение токсических продуктов метаболизма. Использование направленной вибрации с определенной частотой и амплитудой не вызывает болезненных ощущений.

Каждая мышца имеет соединительнотканную оболочку — фасцию, которая соединяет мышечные волокна и обеспечивает их движение. При сильном напряжении, травмах, больших нагрузках и с возрастом фасциальная ткань утрачивает эластичность, возникает «сцепление» фасции с мышцей. Из-за этого движения становятся скованными и ограниченными. Массажер КТ-2966 воздействует на фасции, увеличивает приток крови к ним, повышая их эластичность. Благодаря этому восстанавливается функциональная подвижность и гибкость тела.

Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью кнопки на нижней части устройства. 4 скорости позволяют подобрать комфортный, действенный массаж для различных участков тела, как для нетренированного человека, так и для спортсмена.

Насадки разных видов предназначены для воздействия на разные группы мышц и отдельные мышцы. Пулевидная и точечная насадки применяются для «разбивания» триггеров, проработки тканей и точечного массажа ладоней и стоп. Чрезмерное напряжение, резкие движения, растяжение провоцирует возникновение триггерных точек — плотных болезненных узлов в мышцах. Пулевидная и точечная насадки действуют на проблемные зоны, прорабатывают триггеры и помогают расправить зажатые фасциальные волокна. Точечная насадка обеспечивает более глубокое и интенсивное воздействие. У-насадка используется для массажа мышц шеи, трапециевидной мышцы и мышц вдоль позвоночника. Плоская насадка отлично подходит для проработки широких и крупных мышц. Круглая насадка более универсальная и подходит почти для любых групп мышц, а также обеспечивает более глубокую проработку крупных мышц. Насадка лопатка подходит для разминающего, расслабляющего массажа, удобна для мышц поясницы, икроножных мышц и мышц рук, также можно использовать для всего тела.


Модель КТ-2966 работает от аккумулятора, поэтому массажер можно брать с собой и использовать в любом удобном месте: в спортзале, в офисе, в поездках, в походах или дома. Можно делать массаж, не снимая одежду. ПеркуSSIONный массажер позволит мышцам расслабиться, а также улучшит кровоток и избавит от боли.

Комплектация

1. Перкуссионный массажер — 1 шт.
2. Плоская насадка — 1 шт.
3. Пулевидная насадка — 1 шт.
4. Y-насадка — 1 шт.
5. Круглая насадка — 1 шт.
6. Насадка-лопатка — 1 шт.
7. Точечная насадка — 1 шт.
8. Шнур USB Type-C — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

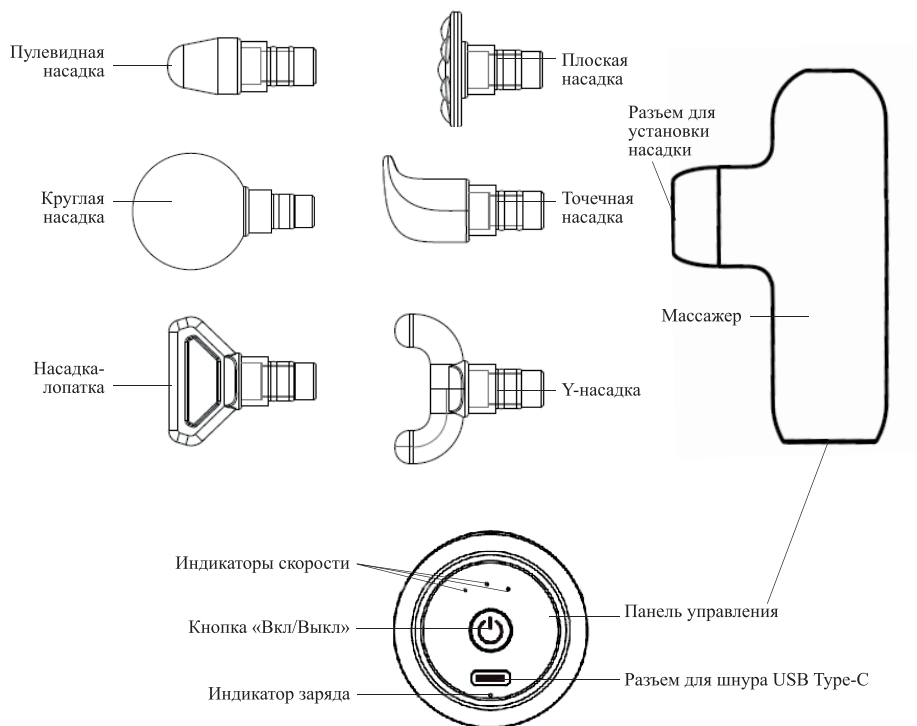

Кнопка «Вкл/Выкл» включает массажер, циклически переключает 4 скорости работы и выключает массажер.

Индикаторы скорости показывают, какая скорость работы установлена:

- горит 1 индикатор — первая скорость работы;
- горит 2 индикатора — вторая скорость работы;
- горит 3 индикатора — третья скорость работы;
- индикаторы поочередно мигают — четвертая скорость работы.

Во время работы **индикатор заряда** показывает уровень заряда аккумулятора:

- индикатор дважды мигает зеленым — уровень заряда 76–100%;
- индикатор трижды мигает зеленым — уровень заряда 51–75%;
- индикатор горит зеленым — уровень заряда 21–50%;
- индикатор часто мигает красным — уровень заряда менее 21%.

Индикатор заряда мигает красным во время зарядки и непрерывно горит зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен.

Для зарядки устройства в комплекте предусмотрен шнур USB Type-C.

Насадки:

- Пулевидная насадка — для точечного массажа, подходит для ладоней, стоп, триггерных точек;
- Круглая насадка — универсальная, прорабатывает почти все типы мышц, подходит для более глубокой проработки крупных мышц;
- Насадка-лопатка — для разминающего, расслабляющего массажа, удобна для мышц поясницы, икроножных мышц и мышц рук, подходит для всего тела;
- Плоская насадка — предназначена для широких и крупных мышц, таких как ягодичная мышца, мышцы бедра, область живота;
- Точечная насадка — для более глубокой проработки небольших участков и триггерных точек, подходит для ладоней, стоп, мышц шеи;
- Y-насадка — предназначена для шеи, трапециевидной мышцы и мышц вдоль позвоночника.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Проздезинфицируйте насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине.

Зарядите устройство. Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению массажера из раздела «Меры предосторожности по применению».

Зарядка аккумулятора

Если индикатор заряда быстро мигает красным, массажер необходимо зарядить. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор заряда мигает красным. Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор будет гореть зеленым непрерывно. Время зарядки аккумулятора составляет 3–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого разрядите массажер, затем заряжайте массажер в течение 1,5–2,5 часов.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
2. Выберите необходимую насадку. Установите насадку до упора в разъем для установки насадки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Устройство начнет работу на первой скорости, будет гореть один индикатор скорости.
4. Для переключения скорости работы нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Если вы только начинаете пользоваться массажером, устанавливайте 1 или 2 скорость работы. Проследите за реакцией организма на массаж. Возможна небольшая мышечная боль после массажа, сравнимая с болью в мышцах после тренировки. После нескольких процедур массажа на небольшой скорости, вы можете попробовать увеличить скорость.

5. Прислоните насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Плавно и медленно двигайтесь вдоль мышцы, не надавливая. Массаж каждой зоны должен длиться от 15 до 60 секунд, а общее время процедуры — не более 10–15 минут.
6. После завершения массажа нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить массажер.

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на лице и голове, передней поверхности шеи, костных выступах, непосредственно на позвоночнике, суставах, лимфоузлах и слизистых оболочках.

Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Возможно временное

покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при пользовании массажером и перед полноценным массажем проследите за реакцией кожи и сосудов.

Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью: ванне, бане и сауне. Следите, чтобы кожа была сухой, берите массажер только сухими руками.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление.

Советы

Рекомендации для массажа различных групп мышц:

Ягодичные мышцы

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 4 раза

Мышцы бедра

- Время воздействия: 20–45 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы голени

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы плеч и предплечий

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы спины

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Триггерная точка

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 1–2 раза

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем от 3 до 15 минут.

Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс должен длиться не более 15 минут.

От одной зарядки прибор работает 2–5 часов в зависимости от скорости и давления на массажер.

Чистка и обслуживание

Протирайте устройство и насадки мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте моющие средства.

Для дезинфекции насадок их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, кожный жир и пот могут привести к повреждению поверхности насадок.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадание жидкостей внутрь корпуса, в разъем для установки насадок, в разъем для шнура USB Type-C, на кнопку «Вкл/Выкл» и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении рекомендуется убрать массажер, насадки и шнур USB Type-C в коробку или пакет для защиты от пыли, а также, чтобы не потерять насадки.

Аккумулятор массажера литий-ионный. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого разрядите массажер, затем заряжайте массажер в течение 1,5–2,5 часов.

Устранение неполадок

Устройство не работает, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Вы не нажали и не удерживали кнопку «Вкл/Выкл»	Чтобы включить массажер, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл»
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите устройство

Устройство не заряжается, индикатор заряда не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки насоса от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C \approx 5 В, 2 А
2. Мощность: 40 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 1,5 А*ч (11,1 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость ударов:
 - на первой скорости: 1800 уд/мин
 - на второй скорости: 2200 уд/мин
 - на третьей скорости: 2600 уд/мин
 - на четвертой скорости: 2850 уд/мин
6. Время работы: 2–5 ч
7. Время зарядки: 3–5 ч
8. Длина шнура: 1 м
9. Размер устройства: 89 × 43 × 146 мм
10. Размер упаковки: 185 × 55 × 190 мм
11. Вес нетто: 0,35 кг
12. Вес брутто: 0,55 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Байчан Текнолэджи Ко., Лтд. 202, Билдинг 1, Шаэр Индастриэл Зоун, Хаосян Роуд, Шаэр Кэмыюнити, Шацзин Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей на массажер или шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на массажере, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Переносите массажер за корпус.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без насадок. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до движущихся частей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки, органы управления и в место установки насадок.
17. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
20. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от массажера.
21. Не подносите включенный прибор к области сердца, лицу и голове, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, костным выступам, непосредственно к позвоночнику, суставам и слизистым оболочкам.
22. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве.
23. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87