



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ COMPACT

BRADEX™
Health & Beauty

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1424

BRADEXRUSSIA
 BRADEXMOSCOW



Массажер для тела, Массажный пистолет «COMPACT», 4 насадки – компактный перкуссионный массажер для проведения мышечного массажа в домашних условиях, в дороге или офисе. Его эффективность заключается в особом методе вибрационной терапии, которая сочетает в себе определенную амплитуду, частоту вибраций и крутящий момент массажного элемента. Вибромассажер имеет 32 режима интенсивности и 4 сменные насадки для проработки различных групп мышц, внутренних слоев сухожилий. Всего 15 минут оздоравливающего массажа способствуют облегчению боли, спазмов от ушибов, растяжений: стимулируется кровоток и лимфодренаж, уменьшается накопление молочной кислоты в мышцах, увеличивается диапазон движений, устраняется мышечная усталость. Массажный пистолет подходит для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата: артрита, мышечной атрофии. Перкуссионный массажер удобно брать с собой: он не занимает много места, полностью заряжается через USB за 2 часа.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:


- Убедитесь, что технические параметры массажера соответствуют напряжению электросети, к которой подсоединен прибор.
- Во избежание удара электрическим током, не подключайте и не отсоединяйте USB-кабель для зарядки мокрыми или влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.
- Не оставляйте массажер без присмотра, когда он подключен к сети.
- Не используйте массажер под одеялом, подушкой или в любом другом месте, где вентиляция может быть недостаточной.
- Устройство не является водонепроницаемым, его запрещено погружать в воду.
- Не эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью. Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях.
- Не эксплуатировать устройство при попадании на его корпус воды или иных жидкостей. Удалите жидкость с корпуса мягкой сухой тканью или салфеткой.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- Не носите массажер за шнур и не тяните за шнур резко.
- Не роняйте и не ударяйте массажер.
- Не располагайте на устройстве тяжелые предметы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Раздраженная кожа, болезни кожи, в том числе острые гнойные воспаления, наличие опухших или воспаленных участков (переломы, ушибы, порезы), варикозное расширение

вен, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора, лихорадка, инфекционные заболевания, беременность, менструация. С осторожностью: в области головы, лица, шейного отдела позвоночника, большеберцовой кости, тыльной стороны стопы и кисти. Если во время использования массажера, вы почувствовали дискомфорт, в том числе на коже, немедленно прекратите использование прибора. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. Товар не является медицинским изделием.

ВИДЫ СМЕННЫХ НАСАДОК

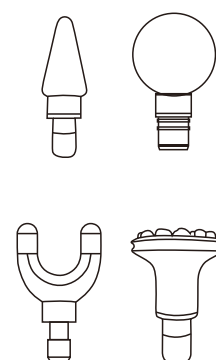

Конусовидная насадка

Для глубокого воздействия на акупунктурные точки. Подходит для проработки глубоких тканей, подошвенных акупунктурных точек, таких как меридианные суставы и т. д.

Сферическая насадка

Для массажа больших групп мышц, бедер, икроножных мышц, ягодиц, живота, плеч.

U-образная насадка


Используется для массажа шеи, спины, ахиллова сухожилия.

Игольчатая насадка

Используется для стимуляции акупунктурных точек на теле, особенно в области бедер, ягодиц, стоп, ладоней.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи и сразу после интенсивных физических нагрузок.
2. Выберите необходимую массажную насадку и ее закрепите на массажере.
3. Включите устройство, нажав и удерживая в течение 3 секунд на кнопку ON/OFF на ручке.
4. Выберите скорость, повторно нажимая на кнопку ON/OFF. Каждое нажатие увеличивает интенсивность на один уровень. В массажере предусмотрено 32 режима интенсивности.
5. Для выбора комфортного уровня воздействия нажимайте на кнопки + и -.
6. Для эффективного массажа начните с рук, ног, затем спины и боков.
7. После завершения процедуры выключите массажер, нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопку ON/OFF на ручке.
8. После массажа выпейте стакан чистой воды.

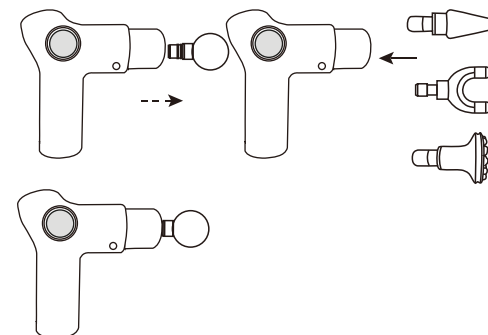

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

Выключите устройство и протрите мягкой сухой тканью. Не погружать в воду! Не использовать абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, полироли или их растворы. Положите массажер в сухое, проветриваемое место.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Не храните устройство в помещениях с повышенной температурой и влажностью. После перемещения аппарата в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час. Не эксплуатировать устройство при попадании на его корпус воды или иных жидкостей. Удалите жидкость с корпуса мягкой сухой тканью или салфеткой. Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Массажер для тела, Массажный пистолет «COMPACT», 4 насадки
Артикул KZ 1424
Материал: ABS-пластик.
Цвет: черный.
Размер: 14,6 x 4,6 x 14 см
Мощность: 24 Вт.
Аккумулятор: 1800 мАч

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья». Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.
Страна происхождения: Китай.
Изготовитель: Джезянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Напряжение: 7,4 В.
Время зарядки: 2 часа.
Время работы: 2 часа.
Зарядный кабель: TYPE-C.
Частота вращения: 1800-3200 об / мин.
Комплектация: массажер – 1 шт., массажные насадки – 4 шт., USB-провод, инструкция.

Международная торговая марка «BRADEX». Рег. №1419183. Израиль - Рег. №204012. Россия - Рег. №444287, №683532
Дату производства смотреть на упаковке.
ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

EAC

- Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией
- Храните в местах, недоступных для детей и животных. Храните вдали от влаги.
- Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Гарантийный срок: 1 год.
Срок эксплуатации: 1 год.