

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ***электромассажёра с ультрафиолетом против морщин вокруг глаз***

### **ОПИСАНИЕ**

Применение массажёра позволит снять спазм мимических мышц и разгладить мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз и вокруг рта, а также ускорить регенерацию кожи. Прибор способствует быстрому, глубокому и безопасному усвоению косметических препаратов.

### **ОСОБЕННОСТИ**

- Восстанавливает упругость кожи, разглаживает морщины, убирает «гусиные лапки», отёки и круги под глазами.
- Повышает эластичность эпидермиса.
- Активизирует обменные процессы внутри клеток кожи.
- Улучшает цвет лица.
- Улучшает кровообращение кожи.
- Усиливает действие крема и масок для лица.


### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Непрерывное пользование: 6 часов.
- Питание: 1 батарейка ААА (не в комплекте).
- Сила тока: 0,1 мА.
- Мощность: 60 мВт.
- Напряжение: 1,5 В.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** электромассажёр, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 3 месяца.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

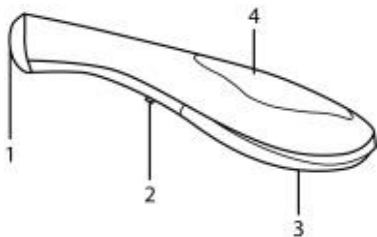


1. Массажная головка.
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Батарейный отсек.
4. Рукоятка.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте аппарат, если на его корпусе есть механические повреждения, нарушена изоляция шнура питания, внутрь корпуса попала вода или другая жидкость.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте играть с ним.
- Допускайте использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Умойте лицо и протрите его полотенцем — оно должно быть сухим.
2. Для лучшего эффекта нанесите крем на кожу.
3. Откройте батарейный отсек и поместите батарейку с соблюдением правильной полярности.
4. Нажмите кнопку включения, чтобы активировать устройство.
5. Держите индуктор волновой энергии (железная пластина) указательным пальцем.
6. Осторожно приступайте к обработке кожи, следуя по массажным линиям лица.

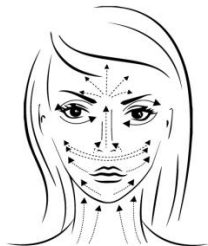

7. Уделяйте особое внимание проблемным зонам. Проводите не менее 4 раз по каждой морщинке для получения лучшего результата.



8. После процедуры нанесите ухаживающее средство в виде крема или лосьона.  
9. Нажмите кнопку выключения, чтобы закончить сеанс.

## УХОД

- Выключайте прибор после каждого использования.
- При необходимости протирайте устройство влажной тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
- Не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Вынимайте батарейки, если долго не используете устройство.