



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатациі

Электрические приборы бытового назначения:
массажеры

Тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптары:
массажерлер

Электричные приборы бытавога прызначэння:
массажеры

**Модель: LEM-24.
Моделі: LEM-24.
Мадэль: LEM-24.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения; массажеров, модели: LEM-24 (далее по тексту – «массажер» или, «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за неблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.
Электрические приборы бытового назначения: массажеры, модели: LEM-24 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: LIANJIANG GELAIBO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Адрес изготовителя: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Китай), e-mail: susanliu819@vip.163.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИДЕЛИЯ

Назначение

Массажер предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для прогревающего массажа коленей, бедер и голени. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие неблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики и комплектация приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощность	12 Вт
Регулировка нагрева	от 45 °C до 65 °C
Емкость аккумулятора	2300 мАч
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220-240 В (-)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °C до +45 °C.

Относительная влажность: 10–80%.

Температура хранения: от +5 °C до +70 °C.

Относительная влажность при хранении: 10–80%.

Комплектация


- Массажер для ног.
- Регулируемый ремень.
- Адаптер питания.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Индикаторы таймера.
2. Кнопка включения/регулировки таймера.
3. Индикатор нагрева.
4. Индикатор вибромассажа.
5. Разъем для зарядки.
6. Ремни с застежками.
7. Кнопка включения нагрева.
8. Кнопка включения вибромассажа.
9. Регулируемый ремень.
10. Шнур для зарядки.

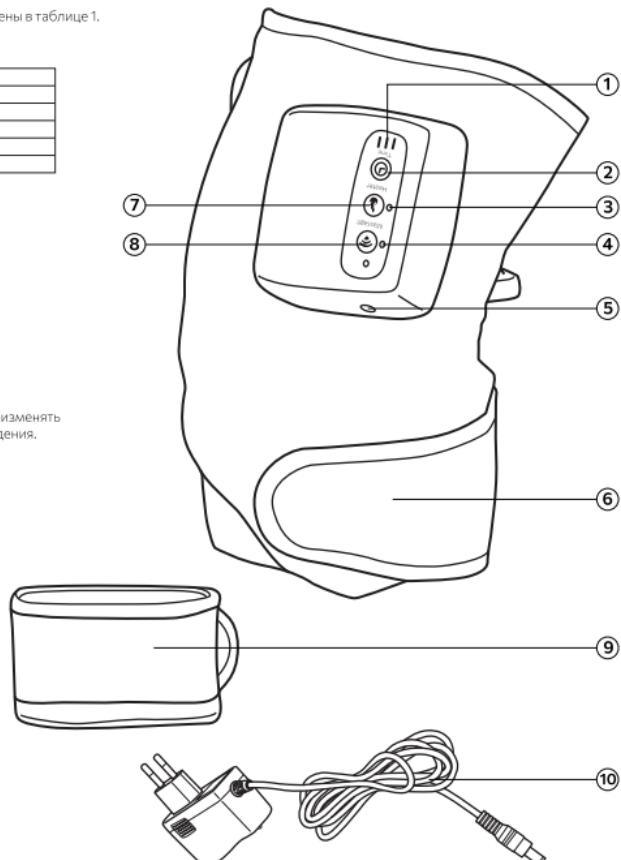

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.
Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).

- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием — прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделия. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя или опасности взрыва, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании-импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании-импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терял об острые кромки.
- Подключение и отключение устройства к источнику питания производите только сухими руками.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, это может быть опасно для жизни и здоровья. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании-импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Выкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.
- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.
- Прибор не предназначен для работы с внешним таймером или отдельно дистанционно управляемой системой.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.


Примечание: Руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные непштатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием зарядите устройство с помощью адаптера питания (в комплекте). Время зарядки – 3 часа, этого времени хватит, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Автономно устройство может работать до 2 часов. При полной зарядке индикатор загорится зеленым цветом.

Внимание! Используйте адаптер питания с напряжением 5 В и 1 А.

1. Зафиксируйте на коленном, локтевом или плечевом суставе бандаж. Для наглядности используйте иллюстрации ниже.

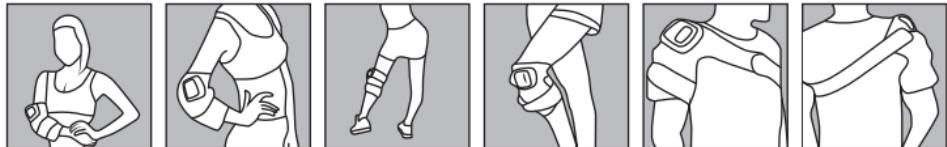

2. Нажмите кнопку , чтобы включить вибрацию. Повторное нажатие на кнопку отключает режим.

3. Нажмите кнопку , чтобы включить нагрев. Повторное нажатие на кнопку отключает режим.

4. Нажмите кнопку , чтобы включить таймер на 15 минут. Повторное нажатие – 10 минут, третью нажатие – 5 минут.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

– После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

– Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспамяняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

– Устройство снабжено сетевым шнуром питания типа X.

– При повреждении шнура питания:

• типа X, его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его агента;

• типа Y, во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо;

• типа Z, шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.

– При возникновении любых неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

– Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

Сведения об утилизации

– Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

– Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства составляет **5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок **6 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влечут за собой потерю гарантии!

– В случае обнаружения неправильной работы устройства необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантыйным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантыйном талоне. Настоящие гарантыйные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

– В течение гарантыйного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантыйного талона. Последующие в течение гарантыйного срока ремонты выполняются бесплатно, и данные о ремонте записываются в гарантыйном талоне.

– Без предъявления гарантыйного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантыйный ремонт не производится.

– Изделия до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантыйного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.