

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 режима работы.
- Мощность: 4 Вт.
- Емкость аккумулятора: 800 мАч.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 3,7 В (---).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер.
- USB-кабель.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Дисплей.
2. Функциональные кнопки.
3. USB-разъем.
4. Электроды.

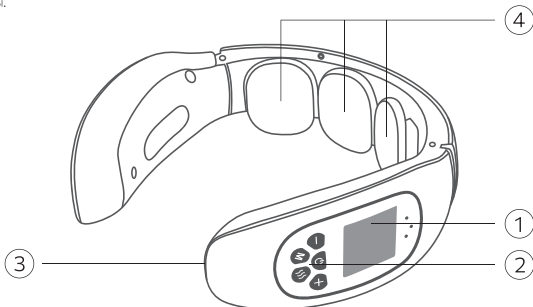


Рис 1.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от +10°C до + 45°C.
Относительная влажность:	10 – 80 %.
Температура хранения:	от +5°C до +70°C.
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%.

Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Очистите кожу на шее и одежду, находящиеся в области шеи.

Внимание! Эффективность работы устройства отличается в связи с различным типом кожи. Сопrotивление сухой кожи небольшое. Если интенсивность слишком маленькая, или вы ощущаете небольшое покалывание в течение нормального использования, рекомендуется использование теплого полотенца в течение 1 минуты, чтобы нагреть область проведения массажа. Не рекомендуется проводить данную процедуру людям с жирной кожей.

2. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на устройстве, устройство начнет работать, загорится световой индикатор. Затем нажмите кнопку «M», чтобы выбрать необходимый режим работы.

- Кнопка «+» увеличивает интенсивность массажа.

- Кнопка «-» уменьшает интенсивность массажа.

Во время выбора интенсивности массажа нажимайте «+» и «-» один раз.

3. Для выбора режима работы нажмите кнопку «M». Устройство может работать в 4 режимах.

4. Чтобы активировать режим нагрева, нажмите кнопку «SSS». Вы услышите 2 звуковых сигнала, устройство перешло в режим нагрева 1 (температура нагрева: 38 °C ±5 °C), нажав еще раз, вы услышите 3 звуковых сигнала, устройство перейдет в режим нагрева 2 (температура нагрева: 43 °C ±5 °C), нажмите еще раз на кнопку, устройство отключит режим нагрева.

5. Чтобы выключить устройство нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Световой индикатор выключится.

6. Использование электродов.

Подсоедините физиотерапевтическую линию с гнездом физиотерапевтической линией, затем присоедините электроды к массажной зоне.

7. Чтобы зарядить устройство вставьте USB-кабель в устройство и подключите его к источнику питания. Загорится индикатор заряда. Время заряда устройства составляет 3 – 5 часов. Когда устройство будет полностью заряжено, световой индикатор будет гореть непрерывно.

Не используйте устройство во время заряда батареи. Длительное использование устройства, заметно уменьшает срок службы батареи.

Внимание!

Во время массажа области шеи вы можете почувствовать покалывание. После массажа на шее может появиться покраснение из-за стимулирования кровообращения. Если вы чувствуете недомогание на протяжении продолжительного количества времени, прекратите использовать устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.