

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 режима вибраций: импульсный, пульсирующий, непрерывный.
- 5 автоматических программ для проработки отдельных участков тела (плечи, суставы, живот, руки, ноги).
- Регулировка интенсивности.
- Регулировка скорости.
- Цифровой дисплей.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 3 В (---).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок управления.
- 4 самоклеящихся электрода.
- Провод для подключения электродов.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от +10°C до +45°C.
Относительная влажность:	10 – 80%.
Температура хранения:	от +5°C до +70°C.
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%.

Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.


- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, это может быть опасно для жизни и здоровья. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.


Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация

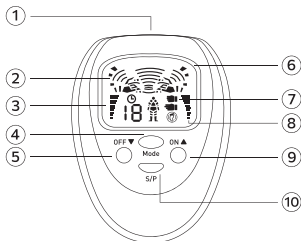

1. Блок управления.
2. Индикатор стимуляции.
3. Скорость.
4. Кнопка выбора режима работы.
5. Кнопка выключения/уменьшения значений.
6. ЖК-дисплей.
7. Режим вибрации.
8. Уровень интенсивности.
9. Кнопка включения/увеличения значений.
10. Кнопка переключения между режимом настройки интенсивности и режимом настройки скорости.

1. Установите батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность.
2. Присоедините провод питания к электродам и блоку управления.
3. Снимите защитную пленку с электродов.
4. Зафиксируйте электроды на необходимых участках тела.
5. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ON.
6. Для выбора режима тренировки используйте кнопку MODE. На дисплее поочередно будут высвечиваться режимы работы: пульсация, импульсная вибрация, непрерывная вибрация. При желании можно выбрать автоматическую программу для проработки определенных участков тела: суставов, мышц плеч, живота, рук, ног.
7. Отрегулируйте интенсивность микротока с помощью кнопок ▼ и ▲.
8. Чтобы перейти в режим регулировки скорости, нажмите клавишу S / P. Отрегулируйте скорость с помощью кнопок ▼ и ▲.
9. Чтобы вернуться в режим регулировки интенсивности, повторно нажмите кнопку S / P.
10. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку OFF.

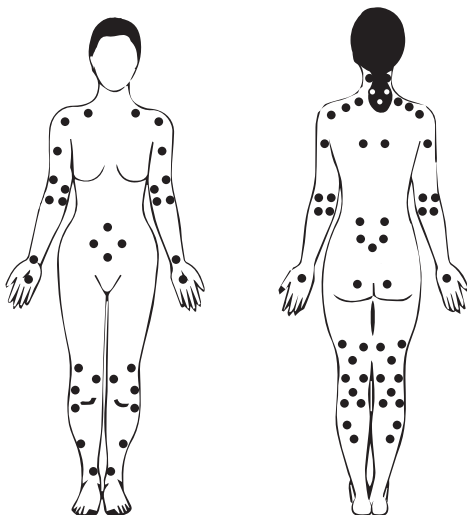

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ПУТИ РЕШЕНИЯ
Прибор не включается	Неправильное подключение	Убедитесь в правильности подключения
	Батарейки разряжены или отсутствуют	Установите или замените батарейки
	Батарейки установлены неправильно	Установите батарейки, соблюдая полярность
Дисплей и индикаторы работают, но стимуляции не происходит	Электроды размещены неправильно	Надежно зафиксируйте электроды на теле
	Слишком низкий уровень интенсивности	Увеличьте уровень интенсивности
	Электроды наложены друг на друга	Установите электроды так, чтобы они не накладывались друг на друга
Слабая стимуляция	Электроды наложены друг на друга	Установите электроды так, чтобы они не накладывались друг на друга
	Электроды и провод плохо присоединены друг к другу	Убедитесь, чтобы электроды были плотно присоединены к проводу
	Электроды размещены неправильно	Надежно зафиксируйте электроды на теле
Раздражения на коже	Слишком длительное использование	Время использования прибора на одном участке тела не должно превышать 15 мин.
	Липкая поверхность электродов загрязнена или слишком сухая	Смочите липкую поверхность электродов водой, при загрязнении очистите поверхность или замените электроды на новые

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую влажную ткань, а затем протрите устройство насухо мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.