

МАССАЖЕР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2 скорости вращения.
- 5 сменных насадок.
- Степень защиты: IP20.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Мощность: 3 Вт.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 3 В (---).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер.
- Роликовая насадка.
- Насадка-губка.
- Насадка-пемза.
- Насадка-спонж.
- Насадка-щетка.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

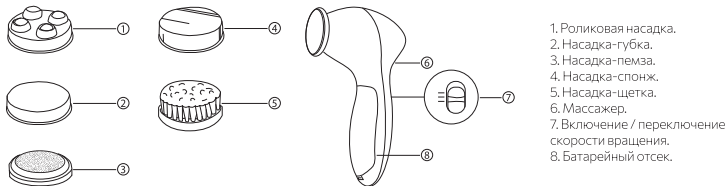


Рис.1 Общий вид устройства

Роликовая насадка (1)

Роликовая насадка предназначена для массажа лица. Стимулирует кровообращение, тонизирует, ускоряет выработку коллагена и способствует улучшению общего состояния кожи.

Насадка-губка (2)

Насадка-губка применяется для деликатного очищения чувствительной или поврежденной кожи лица. Мягко и бережно удаляет макияж и заботится о красоте вашей кожи.

Шлифовальная насадка (3)

Шлифовальная насадка применяется для глубокого очищения кожи. Абразивный диск эффективно отшелушивает омертвевшие клетки кожи и удаляет глубокие загрязнения, не травмируя лицо.

Насадка-спонж (4)

Насадка-спонж предназначена для нанесения косметических средств. Плотная губка тщательно распределяет по коже любые декоративные и уходовые средства кремовой текстуры.

Насадка-щетка (5)

Насадка-щетка подходит для ежедневного очищения кожи лица. Мягкие щетинки тщательно вспенивают и распределяют средство для умывания, эффективно удаляя с кожи макияж.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура:	от +10 °С до +45 °С
Относительная влажность:	10 – 80 %
Температура хранения:	от +5 °С до +70 °С
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами;
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в Центр сервисного обслуживания компании импортёра;
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей;
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортёра с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей;

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Установите батарейки в батарейный отсек прибора, соблюдая полярность.
2. Установите необходимую насадку в зависимости от цели использования. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована на корпусе.
3. Включите прибор, переведя переключатель в положение LOW. При необходимости увеличьте скорость вращения, переключив переключатель в положение HIGH.
4. Круговыми движениями, без сильного надавливания, аккуратно обработайте поверхность кожи. Во избежание получения травм не удерживайте вращающуюся насадку слишком долго в одном и том же месте.
5. После завершения процедуры переведите переключатель в положение OFF.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляет **5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок **6 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

– В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортёра.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

– В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.