

Модель: LMN-01.
Артикул: 2866152.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ванночка для парафинотерапии


Описание: Прибор для проведения комплекса процедур парафинотерапии. Аппарат обеспечивает ускоренное плавление косметического парафина и последующее поддержание его в жидком состоянии при заданной температуре. Время плавления всего парафина при полной загрузке аппарата составляет около полутора часов. В ванночке легко можно проводить процедуру для рук, ног. Не менее актуальной является парафинотерапия запястий и кожи лица. Парафинотопка очень удобна в эксплуатации. Использовать можно как в профессиональных салонах, так и в домашних условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем резервуара для парафина — 3 л
- Время плавления при полной загрузке ~1.5 часа
- Рабочая температура парафина ~52–58 °С
- Время процедуры — 20 минут
- Температура плавления 60–70 °С
- Световой индикатор работы
- Вес ~1100 г

Мощность: 150 Вт.
Напряжение: 220 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: ванночка для парафинотерапии, инструкция, гарантийный талон.
Гарантия: 12 месяцев.

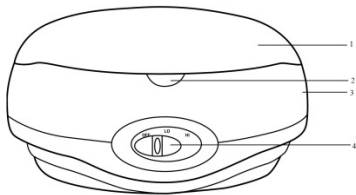

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Крышка | 3. Резервуар для парафина |
| 2. Световой индикатор | 4. Регулятор температуры |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство только по назначению.
- Устанавливайте аппарат только на твердую, ровную и устойчивую поверхность.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений ванны и корпуса аппарата, нарушения изоляции шнура питания, после попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса.
- Перед началом процедур всегда проверяйте температуру парафина на внутренней стороне запястья, чтобы убедиться, что она комфортна для вас.
- Следите за тем, чтобы уровень парафина в ванне нагревателя всегда находился между отметками «MIN» и «MAX». Никогда не включайте нагреватель на длительное время при недостаточном количестве парафина.
- Не разогревайте парафин в пластиковых упаковках, на газовых, электрических плитах, в микроволновой печи. Не добавляйте в парафин какие-либо добавки. Используйте парафин только в его первоначальном составе. Не выливайте из ванны парафин в расплавленном виде.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Сухая, увядающая кожа.
- Обветренная или шелушащаяся кожа.
- Необходимость стимуляции кровообращения, для расслабления и снятия спазма мышц.
- Подготовка к проведению процедур маникюра и педикюра.
- Боли при артритах, бурситах, тендовагинитах, хронических воспалениях суставов, растяжении связок, спортивных травмах, требующих лечения теплом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Гноящиеся инфекции и раны в области наложения парафина.
- Варикозное расширение вен в области наложения.
- Не использовать на участках кожи с нарушением чувствительности.
- **ВНИМАНИЕ!** Чувствительным к высокой температуре пациентам следует предварительно проверить реакцию кожи на расплавленный парафин и, при необходимости, подобрать наиболее комфортную температуру.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Первое включение

- Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.
- Снимите крышку и выньте из ванны аппарата защитную пластиковую решетку.
- Извлеките брикеты парафина из пластиковой упаковки и поместите в ванну нагревателя.
- Вставьте вилку питания в розетку с напряжением 220 В.
- Установите ручку электронного регулятора температуры (4) на сектор шкалы под надписью «НІ» — режим плавления парафина. Закройте ванну крышкой для сохранения тепла. Время плавления всего парафина составляет около 1.5 часов.
- При плавлении парафина периодически контролируйте его состояние и, при необходимости, перемешивайте твердые куски парафина с помощью деревянного или пластикового шпателя.
- После расплавления всего парафина переведите ручку регулятора температуры в середину сектора шкалы — режим поддержания постоянной температуры. Аккуратно опустите на дно ванны защитную пластиковую решетку. Проверьте температуру парафина на внутренней стороне запястья. Дайте парафину немного остыть, если его температура после плавления слишком высока.
- Аппарат готов к проведению процедур парафинотерапии. Проведение процедур необходимо всегда приостанавливать, если уровень парафина в ванне опускается ниже отметки «MIN». В этом случае необходимо довести уровень до отметки «MAX», добавив в ванну новый парафин.

ВНИМАНИЕ! Снижение уровня парафина значительно ниже отметки «MIN» может привести к перегреву аппарата и выходу его из строя. Установка терморегулятора в максимальное положение рекомендуется только для плавления и разогрева парафина! Перед проведением процедур обязательно устанавливайте терморегулятор на режим поддержания температуры.

Уход за кожей рук

- Снимите с рук все ювелирные украшения.
- На сухую чистую поверхность кожи нанесите коллагеновый термокрем, сделайте легкий массаж, пока он не впитается в кожу. Проверьте температуру парафина на запястье.
- Расслабьте кисть и, раздвинув пальцы в стороны, опустите руку ладонью вниз в парафин до запястья, выньте и подержите над ванночкой, чтобы парафин не капал.
- Через 10–15 секунд снова погрузите руку и выньте. Для большей эффективности руку следует погружать в парафин 4–7 раз, пока кисть полностью не покроется парафином. Не оставляйте руку погруженной в ванночку более 2–3 секунд.
- Наденьте на руку защитный пластиковый пакет. Сверху наденьте утепляющую рукавичку. Повторите процедуру с другой рукой.
- Парафин будет отдавать тепло в течение 30 минут. После этого снимите рукавичку и удалите парафин, начиная от запястья, сверху вниз.
- Выбросите использованный парафин. Не разогревайте использованный парафин повторно!

Уход за кожей ступней

- Проверьте температуру парафина.
- Обильно нанесите коллагеновый термокрем на чистые сухие ступни и лодыжки.
- Погрузите ступню в парафин до лодыжки. Держите ступню над емкостью, сохраняя 10–15-ти секундный интервал между погружениями так, чтобы парафин успевал слегка застыть и не капал.
- Погружайте ступню в ванну 4–7 раз на 2–3 секунды. Наденьте на ногу защитный пластиковый пакет. Сверху наденьте утепляющий носок и повторите процедуру с другой ступней.
- Через 30 минут снимите носок и слегка помассируйте ступню, не вынимая ее из пластикового пакета, чтобы парафин не рассыпался. Затем осторожно вынимайте ногу, начиная с лодыжки, и одновременно снимайте парафин в пластиковый пакет.
- Выбросите использованный парафин. Не разогревайте использованный парафин повторно!

ЧИСТКА И УХОД

- Ванночка для парафинотерапии должна чиститься каждые 100 процедур или чаще, если на дне образовался осадок.
- Перед чисткой отключить прибор от сети и дать ему полностью остыть.
- Включить аппарат на несколько минут, чтобы расплавился тонкий слой вдоль стенок.
- Перевернуть ванночку над бумагой или пленкой.
- Выключить аппарат из сети, протереть поверхность ванны одноразовым полотенцем для удаления загрязнений и остатков парафина.
- Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
- Протирайте внешнюю часть прибора слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- Храните прибор в сухом месте.