

Поздравляем Вас! Выбирая Waterpik - стационарный водный ирригатор Вы находитеcь на пути к улучшению здоровья ваших десен, и более здоровой улыбке! С клинически доказанной комбинацией водного давления и пульсаций, Waterpik - стационарный водный ирригатор, удаляет вредные бактерии глубже между зубами и ниже линии десны – где, просто чистка, не приносит должного эффекта. Спасибо за то, что выбрали Waterpik - стационарный водный ирригатор.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

использование электрических продуктов, особенно если у Вас есть дети, всегда соблюдайте правила приведенные ниже.  
**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**

#### ВНИМАНИЕ:

Как уменьшить риск поражения от электрического тока:


- не обращайтесь с зарядным устройством влажными руками.
- не погружайте в воду или в другую жидкость.
- проверяйте шнур зарядного устройства, не допускаются повреждения.
- не используйте, купаясь.
- не помещайте или храните продукт, где он может упасть в ванную, душевую кабину или слив.
- не пытайтесь достать WaterPik, который упал в воду. **Отключите немедленно.**

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для уменьшения риска получения ожогов, удара током, возгорания, серьезных ран или повреждения живой ткани:

- не используйте продукт, если имеются повреждения шнура или вилки. Свяжитесь с сервисным центром Waterpik.
- хорошо проинструктируйте и контролируйте Ваших детей и людей со специальными потребностями в правильной эксплуатации этого продукта.
- не направляйте воду под язык, в ухо, нос или другие тонкие области. Без соответствующих насадок, рекомендованных Waterpik, этот продукт способен к созданию давлений, которые могут вызвать серьезное повреждение в этих областях.
- используйте этот продукт только как обозначено в этих инструкциях или как рекомендовано Вашим зубным врачом - гигиенистом.
- используйте только те насадки, которые рекомендуются компанией Waterpik.
- заполняйте резервуар водой или другим зубным ополаскивателем, (то есть жидкость для полоскания рта или предписанные врачом - гигиенистом). С соотношением 1:1, жидкости для полоскания рта, к воде.
- не бросайте! не вставляйте любые сторонние предметы в отверстия на продукте.
- храните зарядное устройство подальше от нагревательных приборов.
- не используйте вблизи распыляемых аэрозолей.
- не используйте жидкости для полоскания рта, которые содержат ИОД или Отбеливающие растворы.
- если Ваш врач советовал Вам пройти процедуру приема антибиотиков перед зубными процедурами, Вы должны консультироваться с Вашим дантистом перед использованием этого продукта.


**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.**

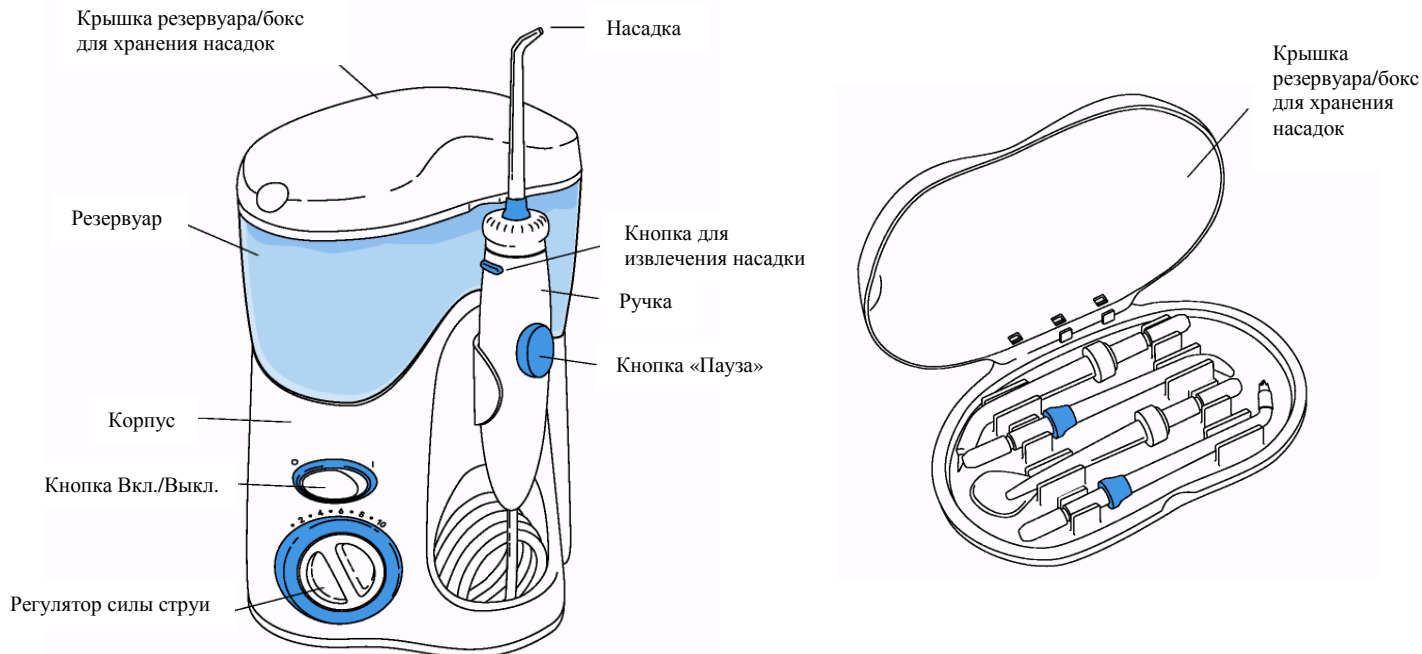

Включите шнур в электрическую розетку. Если розеткой управляет стенной выключатель, убедитесь, что он включен.

Подготовка резервуара. Снимите резервуар и крышку с корпуса. Заполните резервуар теплой водой. Поставьте резервуар на корпус и немного придавите резервуар к корпусу.

Установка и удаление насадок происходит при нажатии на кнопку. Цветное кольцо плотно станет сверху если наконечник будет правильно вставлен на свое место. Чтобы удалять наконечник из ручки, нажмите на кнопку и потяните наконечник из ручки.

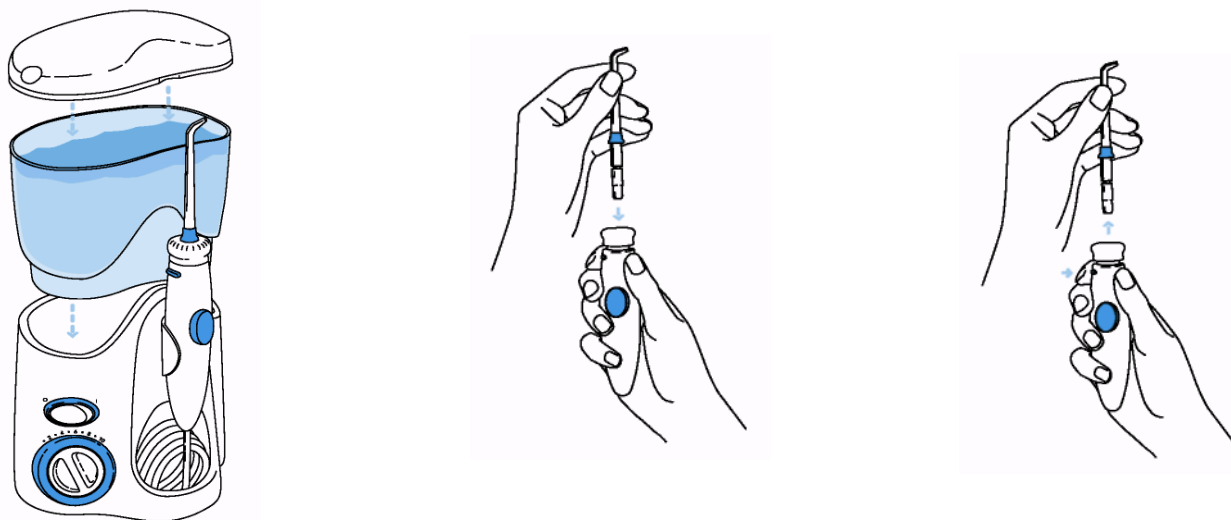

Настройка давления, установите поворотный диск контроля давления на уровень единицы для первого использования. Постепенно увеличивайте давление по ощущениям - или как проинструктирует Вас зубной доктор.


Наклонитесь над раковиной. Нацельте наконечник к зубам.

Вашей свободной рукой, включите единицу. Установите желаемую силу струи.

Направьте поток, поворачивая рукоятку наверху ручки.




Рекомендованная Техника: Прямая реактивная струя под углом 90 градусов к вашей линии десен. Прикрывая губы, чтобы избежать распыливания, но позволяя воде, свободно течь от рта в слив. Для достижения лучших результатов, начните в области коренного зуба (задние зубы), и продвигайтесь к передним зубам. Ведите наконечник по линии десен. Продолжайте, пока все области вокруг и между зубами не будут очищены.

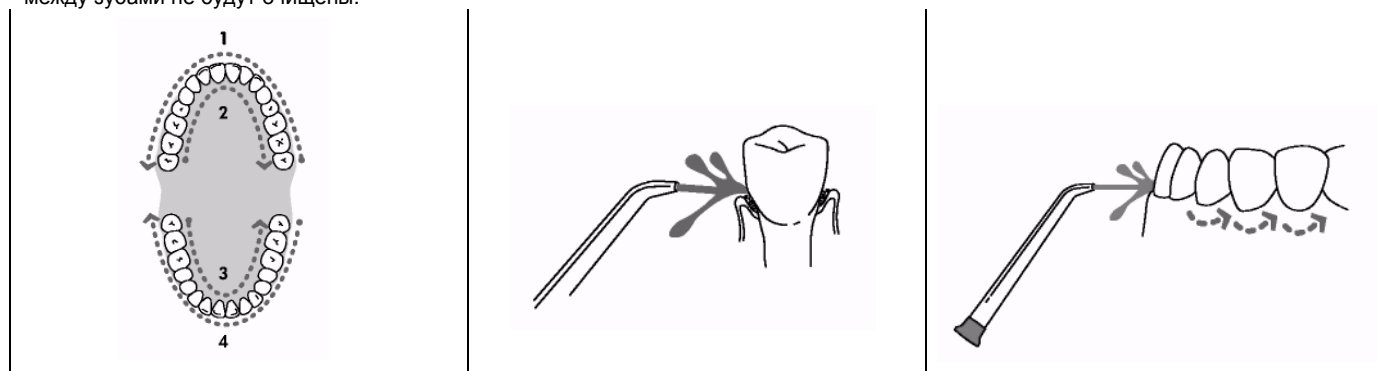

Специальные насадки для десневых карманов – вымывают болезнетворные бактерии из десневых карманов.


Использование насадок для десневых карманов - поместите мягкий наконечник напротив зуба под углом 45 градусов и мягко перемещайте наконечник под линию десны в карман. Включите прибор с самым низким давлением и мягко вставляйте наконечник между зубами. Продолжайте водить наконечник по линии десны, пока резервуар не опустеет.

Наконечник для чистки языка. Наклонитесь над раковиной. Разместите наконечник для чистки языка. Используйте самое низкое давления, увеличивайте по ощущениям. Мягко разместите насадку для чистки языка в центр/среднюю линию вашего языка приблизительно наполовину пути назад и с легким напряжением ведите вперед.

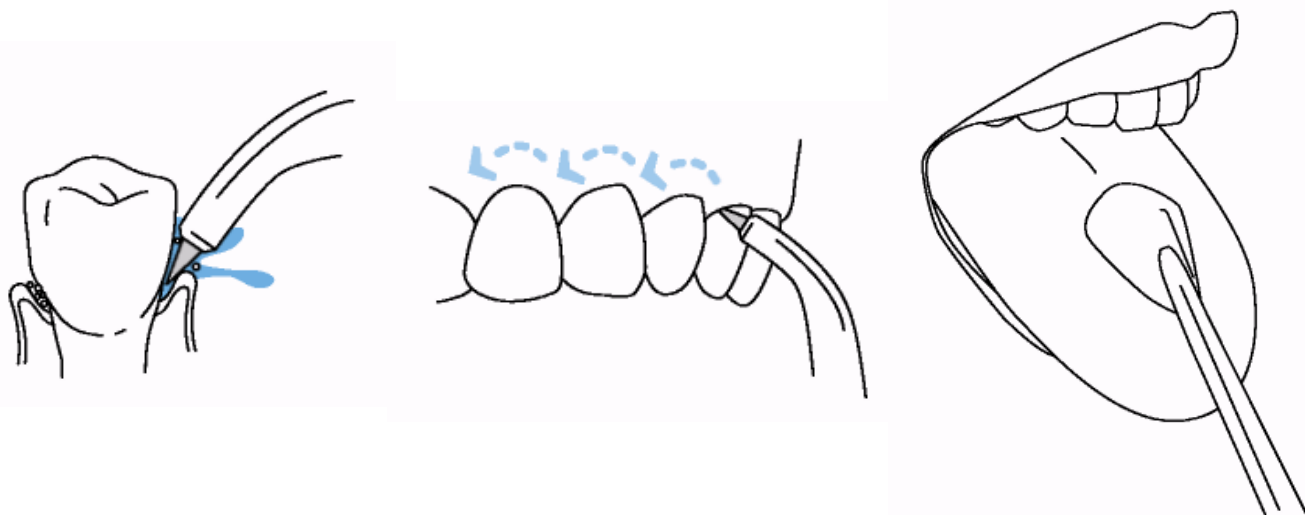

Ортодонтический наконечник - специальный ортодонтический наконечник специально разработан, чтобы одновременно чистить и ополаскивать труднодоступные области вокруг фигурных скобок брекет-систем и других ортодонтических конструкций.

Использование ортодонтического наконечника, наклонитесь над раковиной и водите щетинами щетки, чтобы удалить налет вокруг брекет - систем.

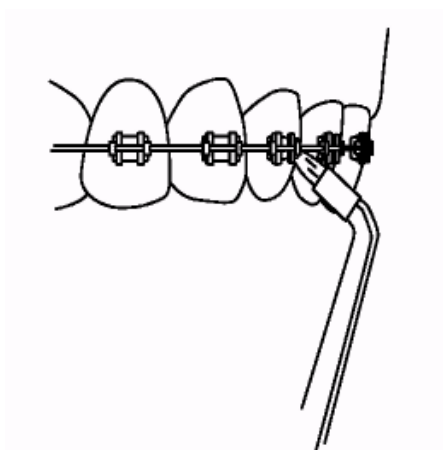

Вы можете использовать с Вашим WaterPik жидкость для полоскания рта. Отметьте: использование некоторых антибактериальных ополаскивателей может сократить срок использования Вашего WaterPik.

Если у Вас есть вопросы об использовании специфических ополаскивателей в Вашем WaterPik, свяжитесь с компанией по обслуживанию Waterpik. После использования любого специального ополаскивателя в резервуаре, промойте в течение одной минуты проточной водой. Частично заполните резервуар теплой водой из-под крана. Направьте наконечник в слив. Включите WaterPik и позвольте ему поработать до полного опустошения. Это поможет препятствовать засорению наконечника и продлит срок службы прибора.

Никогда не опускайте прибор в воду. Вытрите прибор мягкой тканью и слабоактивным неабразивным моющим средством. Резервуар может быть вымыт с мыльной водой или в посудомоечной машине. Перед очисткой, отключите прибор от электрической розетки. Ремонт этого прибора должен быть выполнен только сервисным центром обслуживания Waterpik.