

LUAZON

Модель: LMZ-017.
Артикул: 179892.



МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: электрический
- Несколько режимов работы
- Материал: пластик
- Тип питания: 2 батарейки типа AAA (не в комплекте)

Гарантия: 6 месяцев.

Комплектация: массажер, инструкция, гарантийный талон.

Благодаря значительному прогрессу биофизики, стоящей на границе физики и классической медицины, является доказанным факт влияния внешнего магнитного поля на ткани человека, его органы, нервную систему, ферментную систему и собственное магнитное поле. Внешнее магнитное поле при воздействии на акупунктурные точки может активизировать обмен веществ в тканях, усиливать кровоток, оксигенацию и питание тканей и органов. Эффекты, возникающие под действием магнитного поля, достаточно широко используются для лечения различных заболеваний. Предлагаемый Вашему вниманию аппарат разработан на основе новейших исследований в области магнетизма и акупунктурной теории, пришедшей к нам из традиционной китайской медицины, и совмещает в себе магнитную и механическую акупунктуру на важнейшие точки, расположенные вокруг глаз – такое акупунктурное воздействие обеспечивает нормализацию функций органа зрения, а также стимулирует внутреннюю энергию Qi.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Дизайн массажера, созданный при помощи компьютерной программы, наиболее точно соответствует форме окологлазничной области и месторасположению акупунктурных точек. Массажер имеет 22 массажных пальчика, сделанных из высококачественной силиконовой резины, не вызывающей аллергических реакций. На вершине каждого массажного пальчика расположен мощный постоянный магнит из сплава редкоземельных металлов. Микромотор, расположенный внутри массажера, обеспечивает акупунктурное воздействие с частотой и интенсивностью в соответствии с одной из программ массажа.

МАССАЖЕР РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Студентам высших и средних учебных заведений, которые нередко страдают от ложной близорукости, связанной со спазмом аккомодации на фоне переутомления.
- Служащим, чья работа связана с большой зрительной нагрузкой: операторы компьютеров, бухгалтеры, дизайнеры, секретари, учителя и водители.
- Лицам с наличием пресбиопии (возрастные изменения преломляющей силы глаза, которые требуют ношения «плюсовых» очков).
- При наличии морщин, мешков и темных кругов вокруг глаз.
- При наличии жалоб на головную или глазную боль, невралгию, бессонницу.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- Обострение тяжелых хронических заболеваний.
 - Гипотонические состояния.
 - Инфекционные заболевания.
 - Острые воспалительные заболевания глаз, глаукома.
- При наличии неврологических заболеваний необходима консультация врача.

ВНИМАНИЕ!


- Использование массажера детьми младше 8 лет допускается только в присутствии и при постоянном контроле со стороны взрослых.
- Перед проведением массажа необходимо занять удобное положение полулежа.
- Не используйте массажер во время прогулок или при управлении автомобилем.
- Рекомендуется снимать контактные линзы перед использованием массажера.
- Продолжительность сеанса массажа не должна превышать 15 минут.

- Не используйте массажер во время сна.
- Запрещается использовать массажер в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
- Используйте массажер только по его прямому назначению.
- Запрещается самостоятельно разбирать аппарат.

Подготовка аппарата к работе: при перемещении аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать один час перед началом его использования.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

Откройте крышку отсека питания, расположенную на внутренней поверхности массажера, и установите две щелочных (щелочных) батареи 1.5 В размера AAA в соответствии с указанной полярностью. Закройте крышку отсека питания. При использовании адаптера необходимо извлечь батареи из отсека питания. Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что он имеет необходимые выходные параметры напряжения, тока и полярность разъема. Сетевой адаптер не входит в комплект поставки и приобретается дополнительно. Запрещается использовать с аппаратом адаптеры от других производителей.

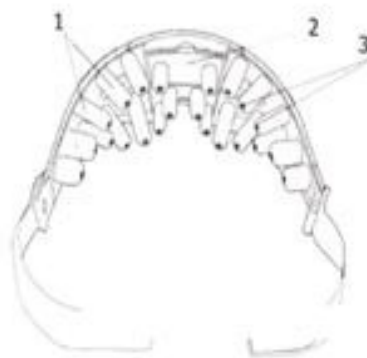

1. Массажные пальчики из силикона
2. Крышка отсека питания
3. Мощные постоянные магниты

РЕГУЛИРОВКА ЭЛАСТИЧНОГО РЕМНЯ

Отрегулируйте длину эластичного ремня массажера для его удобного крепления на лице. Массажер не должен оказывать сильное давление на область глаз или область переносицы. Корпус массажера не должен касаться головы.

МАССАЖНЫЕ ПРОГРАММЫ

- A) Рекомендуется перед использованием массажера очистить лицо от декоративной косметики.
- B) Чтобы включить массажер, нажмите кнопку «ON/OFF» один раз.
- C) Массажер имеет несколько режимов работы. Переключение режимов осуществляется нажатием на кнопку «Select».
- D) Нажмите кнопку таймера один раз для установки 3-х минутного массажа, два раза для 5-ти минутного. Если таймер не установлен, массажер автоматически завершит работу через 20 минут.
- E) Наденьте массажер на голову. При необходимости подрегулируйте силу прижима массажера к области глаз с помощью эластичного ремня.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА

1. Снятие напряжения и усталости глазных мышц.

Массаж в течение 5-ти минут может полностью снять напряжение глаз, понизить внутриглазное давление и улучшить кровоснабжение глазного яблока и мышц. Массажер быстро уменьшает отечность век, способствует рассасыванию гематом, восстановлению слезной пленки, снимает гиперчувствительность глаз к яркому свету, вызванному переутомлением глазных мышц. Рекомендуется проводить не менее 3-х раз в день.

2. Уменьшение симптомов стресса и усталости (мешки и круги под глазами).

Массаж 2 раза в день в течение 30–40 дней способствует уменьшению мешков под глазами (образованных скоплением жировой ткани и воды) и темных кругов, возникающих в результате недосыпания, переутомления и недостаточного отдыха.

3. Улучшение функций головного мозга и нормализация сна.

Массаж в течение 5–10 минут ежедневно перед сном способствует быстрому достижению фазы глубокого сна. Массажер можно применять при нарушении сна и бессоннице, вызванной неврастенией или тревожными состояниями.

4. Уменьшение глубины морщин вокруг глаз и повышение эластичности кожи.

Ежедневный массаж в течение 5–10 минут значительно повышает эластичность кожи, стимулирует обмен веществ в клетках кожи, что обеспечивает выравнивание поверхности и цвета кожи, уменьшение глубины и количества морщин. Применение специальных средств для кожи вокруг глаз повысит эффективность массажа.

5. Близорукость.

Для быстрого и устойчивого эффекта достаточно в течение 3-х дней проводить массаж 3 раза в день по 3–5 минут. Это приводит к улучшению работы аппарата аккомодации, снятию спазма аккомодации и повышению остроты зрения. Для повышения эффективности массажа рекомендуется чередовать его с аккомодативной тренировкой через «дырчатые» очки. Не рекомендуется использовать массажер и тренажер одновременно.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Если после использования массажера вокруг глаз появилось легкое покраснение, рекомендуется помассировать кожу легкими движениями пальцев.

2. После травмы или операции на глазах применение массажера разрешается только по разрешению врача.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. При нажатии кнопки ON/OFF массажер не включается [индикатор не загорается] – проверьте правильность установки и полярность батарей питания.

2. Массажер работает с низкой интенсивностью – проверьте состояние батарей питания и при их разряде замените на новые.

3. При неаккуратном обращении постоянные магниты могут выпасть из силиконовых массажных пальчиков. Если это произошло, необходимо вставить выпавший магнит на место.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Корпус массажера и блока управления рекомендуется протирать мягкой фланелевой тканью.

При сильном загрязнении можно слегка увлажнить ткань в мыльном растворе. Запрещается использовать растворители! Берегите аппарат от попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса.

Аппарат следует хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и пыли месте. Не храните аппарат рядом с нагревательными приборами или в месте с повышенной влажностью.

Вынимайте батареи питания из блока управления перед длительными перерывами в использовании массажера. С массажером рекомендуется использовать алкалиновые батареи питания. Храните аппарат в месте, недоступном для детей!

LuazON. Искусство заботы о близких.