


## Сервисные центры

г. Москва 3-й Нижнелихоборский пр., д.1 Тел. +7 495 792-51-50	г. Вологда ул. Лечебная, д. 32 А Тел. +7 8172 53-57-76, 53-14-60	г. Нижний Новгород ул. Переходникова, д. 16 Тел. +7 831 216-10-73	г. Ростов – на – Дону ул. Чучева, д. 46-1 Тел. +7 928 907-16-29
г. Барнаул ул. Автотранспортная, д. 55 Д Тел. 3852 61-01-76, 61-01-83	г. Воронеж ул. Плехановская, д. 62 Тел. (473)277-71-64, 239-22-31	г. Кострома ул. Советская, д. 77 Тел. +7 4942 316267	г. Самара ул. Мяги, д. 22 Тел. +7 846 972-68-26
г. Белгород ул. Б.Хмельницкого, д. 52 Тел. +7 4722 32-04-47, 37-25-40	г. Воскресенск ул. Пионерская, д. 10/11 Тел. +7 496 442-41-77	г. Орел бульвар Победы, д. 3 Тел. +7 4862 63-27-33	г. Таганрог ул. Чучева, д. 46-1 Тел. +7 8634 325563
г. Бийск ул. Максимовой, д. 5 Тел. +7 3854 35-67-29, 32-86-79	г. Екатеринбург ул. Первомайская, д. 69 Тел. +7 343 287-27-07	г. Пенза ул. Свердлова, д. 2, оф. 505 Тел. +7 8412 32-11-11, 39-01-68	г. Тамбов ул. Октябрьская, д. 6 Тел. +7 980781-29-49
г. Владивосток ул. Дальзаводская, д. 21 Тел. +7 423 277-37-12	г. Ижевск ул. Автозаводская, д. 36 Тел. +7 3412 50-87-94, 50-87-77	г. Петрозаводск Первомайский пр-т., д. 1 Тел. +7 8142 63-32-04, 63-31-04	г. Тюмень ул. Полевая, д. 14/3 Тел. +7 3452 68-15-61
г. Владимир ул. Батурина, д. 39, корп. 21 Тел. +7 4922 43-01-36	г. Липецк ул. Циолковского, д. 7 Тел. +7 4742 240-235, 240-237	г. Петропавловск-Камчатский Рыбаков пр-т., д. 28/1 Тел. +7 4152 26-32-09, 23-04-93	г. Челябинск ул. Пушкина, д. 12 Тел. +7 351 211-37-88

## Руководство по эксплуатации ультразвуковой массажер с функцией гальванотерапии SR-06VI




для ухода за кожей лица и тела  
(лифтинг, разглаживание морщин,  
борьба с целлюлитом)

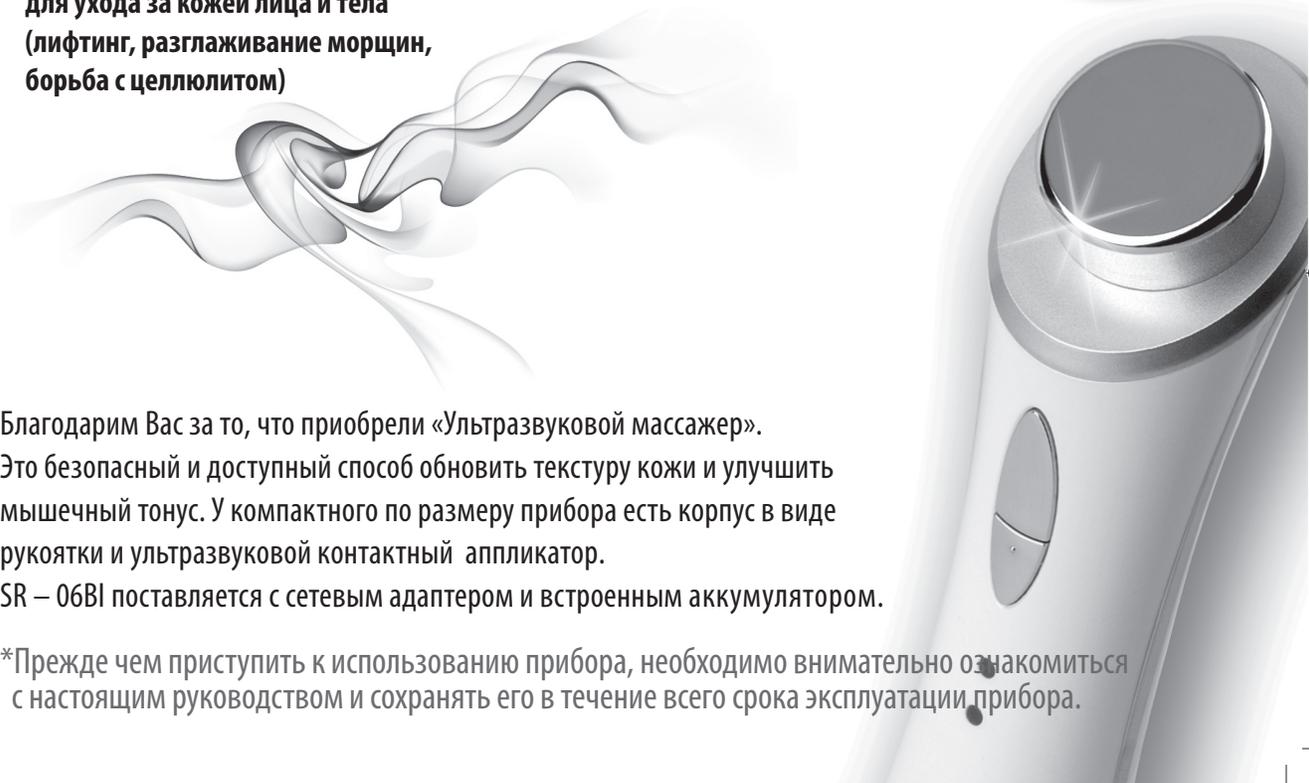

Благодарим Вас за то, что приобрели «Ультразвуковой массажер».  
Это безопасный и доступный способ обновить текстуру кожи и улучшить мышечный тонус. У компактного по размеру прибора есть корпус в виде рукоятки и ультразвуковой контактный аппликатор.  
SR – 06VI поставляется с сетевым адаптером и встроенным аккумулятором.

\*Прежде чем приступить к использованию прибора, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и сохранять его в течение всего срока эксплуатации прибора.

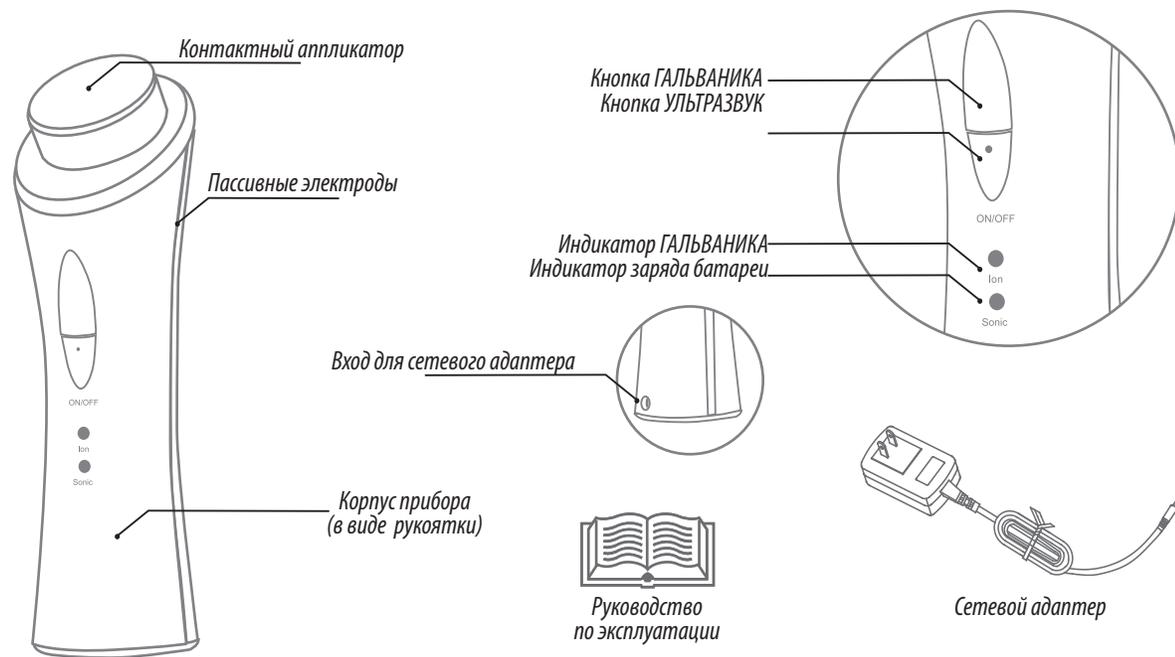

Массажер имеет эргономичный дизайн и удобную форму, работает от встроенного аккумулятора. С его помощью вы сможете легко ухаживать за кожей в домашних условиях. После проведения нескольких процедур у вас будет более здоровая, эластичная и сияющая кожа.

**Ремонт приборов производит авторизованный сервисный центр:** 000 «Технологии здоровья», г. Москва, тел. +7 926 452 6353, + 7 495 7925150 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням

**Условия гарантии: Гарантия на данный массажер 1 год.**

**Гарантия не распространяется на встроенный ионно-литиевый аккумулятор.**

Производитель гарантирует устранение недостатков, возникших по вине производителя. В случае невыполнения гарантийных обязательств в течение 14 дней со дня сдачи товара в гарантийную мастерскую, или в случае 3-кратного гарантийного ремонта изделия и следующей поломки в течение гарантийного срока не по вине покупателя, покупатель имеет право на замену товара новым того же типа или на возврат денег.

Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя

\_\_\_\_\_ ФИО и подпись покупателя

Наименование и адрес торговой организации	
Модель и номер партии	
Дата продажи	
Подпись продавца	

**Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:**

1. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении претензии на качество изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - 2.1. Механические повреждения.
  - 2.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
  - 2.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - 2.4. Дефекты, возникшие в результате отклонений от Государственных технических стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)
4. Настоящая Гарантия не распространяется на аксессуары, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности и являются предметом износа.

**Изготовлено по заказу:**

000 «Технологии здоровья» Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., 1  
 тел./факс: +7 (495) 792 51 50, www.t-zdor.ru, e-mail: info@t-zdor.ru  
 ИП Федоров А.А., Екатеринбург ул. Первомайская, 69  
 тел./факс: +7 (343) 287 27 07, www.tz66.ru, технологии-здоровья.рф

**Производитель:**

«Ace-Tec Co., Ltd.»,  
 г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Наименование	Ультразвуковой массажер с функцией гальванотерапии SR-06BI
Напряжение сети	220~240 В, 0,5 А сетевой адаптер 5 В, 500 мА
Питание	Встроенный аккумулятор Li-Ion
Мощность ультразвука:	~ 30 мВт.
Частота ультразвуковых колебаний	5 МГц
Гальваника:	0В ~ 5В ионы (+), В ~ 5В ионы (-)
Размеры	41 x 39 x 128 мм (без адаптера)
Автоматическое отключение:	10 ± 1 мин.


Полной зарядки аккумулятора хватает на 30 минут эксплуатации аппарата.  
 Время зарядки: 2 часа (более 3х часов при первой зарядке аккумулятора или если аппаратом не пользовались более 3х месяцев).

Автоматическое выключение: примерно через 10 минут после последнего нажатия на кнопку ГАЛЬВАНИКА или УЛЬТРАЗВУК.

\* Изготовитель вправе изменять технические данные и внешний вид прибора с целью улучшения его работы без предварительного уведомления

**Массажер «SONIC & ION Beauty Therapy»** предназначен для ультразвуковой и гальванической (микротоковой) терапии. Осуществляет комплексный уход за кожей лица и тела: микромассаж, глубокую чистку кожи, стимуляцию процессов регенерации и восстановления кожи, повышение эластичности и упругости кожи.

Активный элемент аппарата генерирует ультразвуковые колебания с частотой 5 МГц (5 миллионов колебаний в секунду). Такая частота колебаний является наиболее благоприятной для кожи. Ультразвук — это звуковые колебания частотой свыше 20 кГц, которые не воспринимаются человеческим ухом. Ультразвук может проникать в кожу на глубину до 5 см. За счет активизации работы клеток и стимулирования капилляров ультразвук улучшает метаболизм клеточных тканей таким образом, что кожа более эффективно поглощает питательные вещества. Кроме того, ультразвук может снижать интенсивность старения клеток и уменьшать морщины. Кожа при этом становится более упругой и сияющей.

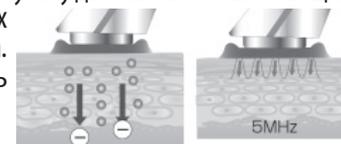

Воздействие осуществляется за счет передачи колебаний через тонкий слой воды или косметического средства на поверхности кожи. С помощью ультразвука можно проводить фонофорез лекарственных веществ и косметических препаратов (ультрафонофорез).

Вместе с ультразвуковым массажером «SONIC & ION Beauty Therapy» необходимо использовать специальный косметический крем. Косметический крем выполняет две функции. Во-первых, косметический крем является средой для проведения ультразвука в кожу.

Во-вторых, крем содержит большое количество необходимой коже влаги и питательных веществ. При обработке кожи ультразвуком происходит более эффективное насыщение ее влагой и питательными веществами. Ультразвуковой массажер SR-06 BI можно использовать для уменьшения объемов тела. Ультразвук, генерируемый прибором, может проникать на глубину до 5 см в кожу, тем самым достигая жировой прослойки. Ультразвук способствует разложению жира и превращению его в тепло, тем самым выводя жир из вашего тела. Это так называемый процесс сжигания жира. Таким образом, прибор можно использовать для удаления лишних объемов на любом участке вашего тела. При этом желательно использовать крем для похудения, рекомендованный вашим косметологом.

#### 4 ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «Ультразвуковой массажер с функцией гальванотерапии»?

При помощи гальванических токов в кожу вводятся различные активные препараты («ионофорез»). Применение гальванических токов позволяет снять спазм мышц лица и разгладить мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта и на щеках, а также усилить регенерацию кожи. Благодаря воздействию гальванических токов усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы в клетках кожи, повышается синтез коллагена и эластина, что ведет к повышению упругости кожи и уменьшению морщин.

Использование слабых гальванических токов в качестве дополнительной функции позволяет расширить сферу использования аппарата. Под воздействием слабого постоянного электрического тока в биологических тканях происходит перемещение ионов (Na, K, Cl, Ca, Mg и многих других), изменяется проницаемость биологических мембран, активизируются системы синтеза многих важных веществ, в частности, коллагена и эластина, способствующих упругости и эластичности кожи. Ценным свойством гальванического тока является способность вводить в глубокие слои кожи и подкожной клетчатки заряженные (т.е. имеющие электрический заряд) препараты. Эта методика, получившая название ионофореза, способствует более эффективному и экономичному использованию косметических препаратов. Использование отрицательной полярности обеспечивает антисептическую обработку кожи, открывает кожные поры, расщепляя жир, очищает сальные железы от закупорок, осветляет пигментные пятна. Использование положительной полярности способствует омоложению кожи, нормализует pH, уменьшает пористость кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина, выводит токсины и свободные радикалы, усиливает регенераторные свойства кожи, снимает раздражения и аллергические реакции.

Использование массажера повышает эффективность введения препаратов при одновременном снижении их расхода, способствует глубокому внутриклеточному проникновению препаратов, усиливает метаболизм кожной ткани, стимулирует циркуляцию, гидратирует клетки кожи, снимает спазмы и отеки, разглаживает морщины, не травмирует, не растягивает кожу, настолько деликатен, что может использоваться для массажа вокруг глаз и губ. При регулярном использовании способствует уменьшению объемов тела, выравниванию рельефа кожи, уменьшению проявлений целлюлита.

#### Устранение неисправностей

9

№ п/п	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
1.	Аппарат не работает	Аккумулятор разряжен. Аккумулятор заряжается.	Сначала зарядите аккумулятор. В целях безопасности аппарат не работает во время зарядки. Дождитесь окончания зарядки аккумулятора.
2.	Индикатор УЛЬТРАЗВУК мерцает 5 раз, и аппарат выключается.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
3.	Аккумулятор заряжается более 3х часов.	Вероятно это первая зарядка аккумулятора, или же аппарат не эксплуатировался более 3х месяцев.	Очень низкий уровень зарядки аккумулятора, поэтому требуется больше времени для его зарядки.
4.	Непродолжительное время работы аппарата.	Даже после длительной зарядки аккумулятора, время работы аппарата не увеличивается. Возможно, требуется замена аккумулятора.	




ВНИМАНИЕ

#### Ремонт прибора:

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или вносить в прибор какие-либо изменения. В случае повреждения прибора и/или сетевого адаптера немедленно прекратите их использование. Обратитесь в ближайший авторизованный центр или к квалифицированному специалисту для ремонта прибора. Выполнение ремонтных работ неквалифицированным персоналом может привести к чрезвычайным последствиям, например к возгоранию в результате неправильной работы.

1. От подбородка до области под ухом, над ухом, от уголка рта к виску 2. Из под носа к виску, от уголка рта к носу, от крыла носа к виску.

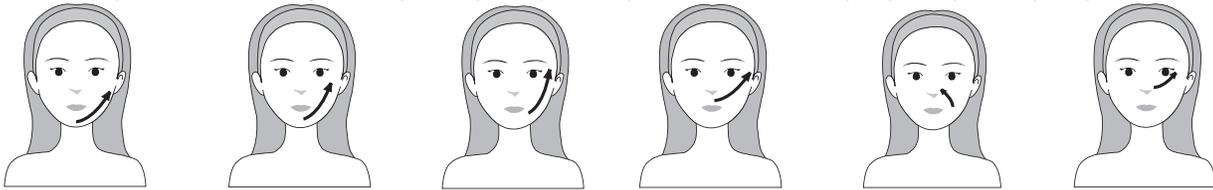

По окончании выполнения процедуры от 1 до 2 пункта у Вас останется около 1 минуты для завершения процедуры. Массажуйте щеки, уголки рта и подбородок, как показано на рисунках.

### Чистка прибора:

1. Выключите прибор. После использования вынуть вилку сетевого адаптера из розетки и штекер сетевого адаптера из корпуса прибора.

2. С помощью мягкой ткани или салфетки удалить остатки крема с контактного аппликатора.


**Внимание!** Не допускается производить очистку прибора с помощью воды или другой жидкости, поскольку при проникновении она может вызвать порчу прибора и (или) даже поражение электрическим током, а также возгорание из-за короткого замыкания.

3. Храните прибор вместе с сетевым адаптером.

### СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ:

Для замены аккумулятора, обратитесь к дистрибьютору, у которого вы купили данный прибор. Чтобы достать аккумулятор, следуйте нижеприведенной инструкции:

1. С помощью отвертки открутите шуруп на задней панели корпуса.
2. Выньте шуруп.
3. Снимите заднюю панель.
4. Выньте аккумулятор из аппарата.

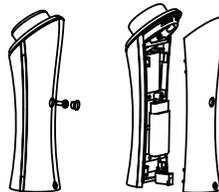

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию массажера, изучите правила техники безопасности. Знание поможет Вам обеспечить правильную и безопасную работу прибора, а также предупредить риск нанесения травм Вам и другим людям.

**Этот раздел содержит указания, несоблюдение которых может привести к тяжелым травмам или порче имущества.**

-> После использования вынуть вилку сетевого адаптера из розетки. При этом необходимо держаться непосредственно за вилку. Запрещается тянуть шнур. Это может привести к возгоранию и/или несчастным случаям.

-> Не допускается резать, портить или ремонтировать шнур сетевого адаптера. Не допускается тянуть, скручивать или связывать шнур с чрезмерным усилием. Не допускается ставить на шнур тяжелые предметы. Кроме того, необходимо исключить защемление шнура между предметами. Не наматывайте шнур на прибор. Это может вызвать возгорание и/или поражение электрическим током. В случае повреждения или нагревания шнура или вилки сетевого адаптера необходимо немедленно вынуть вилку сетевого адаптера из розетки, в противном случае возможно возгорание, поражение электрическим током, короткое замыкание и/или ожоги.

-> Не допускается использовать массажер в непосредственной близости к горючим материалам, например, бензина, ацетона, лаков и т.д. Это может привести к взрыву или возгоранию.

-> Не касайтесь сетевого адаптера мокрыми руками. Руки нужно предварительно насухо вытереть, в противном случае возможно поражение электрическим током и/или короткое замыкание.

-> Не храните сетевой адаптер вблизи источников воды, например, ванн, раковин и других сосудов, а также в местах с повышенной влажностью воздуха. В противном случае возможно разрушение изоляции прибора и, как следствие, поражение электрическим током и/или короткое замыкание.

-> Берегите прибор от детей. Не разрешайте детям играть с прибором, поскольку это может привести к ожогам, поражению электрическим током или другим травмам.

-> Используйте прибор только по прямому назначению.

-> Не используйте сетевой адаптер, если он был поврежден в результате падения или удара. Это может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.

-> Не используйте для чистки прибора легковоспламеняющиеся жидкости, бензин и другие растворители. Это может привести к порче прибора.

-> Не используйте сетевой адаптер, если он подвергался воздействию прямых солнечных лучей или излишней влаги.

-> Необходимо использовать только сетевой адаптер, входящий в комплект прибора.

-> Не используйте удлинитель для подключения сетевого адаптера к стенной розетке.

-> Не погружайте прибор в жидкости.

-> Храните сетевой адаптер и шнур в сухом месте.

## 6 Предупреждения перед использованием/ Применение

### Дополнительные правила техники безопасности:

Если после процедур с использованием массажера у вас наступило ухудшение самочувствия, необходимо немедленно прекратить использование и проконсультироваться с косметологом или лечащим врачом.

По вопросам использования частоты ультразвуковых колебаний и продолжительности процедур с использованием массажера необходимо проконсультироваться с косметологом. При использовании специального косметического крема для кожи необходимо соблюдать рекомендации косметолога.

### Противопоказания к использованию прибора:

- При острых воспалительных процессах (температура выше 38°C)
- При хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- При заболеваниях крови, тромбозах
- При психических заболеваниях
- При нарушениях сердечного ритма
- При онкологических заболеваниях
- Во время беременности
- При эпителиоме, меланоме
- При присутствии в зоне воздействия аппарата металлических материалов, имплантированных в кости и ткани, а также других имплантатов
- На поврежденных участках кожи

### Подготовка массажера перед использованием

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

> Вставьте штекер сетевого адаптера в разъем для зарядного устройства, затем вставьте вилку сетевого адаптера в электрическую розетку. Светодиодный индикатор загорится зеленым, это означает, что аккумулятор заряжается.

> Полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа, если вы заряжаете его впервые или не пользовались им длительное время. Полная регулярная зарядка аккумулятора около 2 часов.

> Если зеленый светодиодный индикатор погас, зарядка завершена.

> Полной зарядки аккумулятора хватает примерно на 30 минут эксплуатации аппарата.

#### ГАЛЬВАНИКА / ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ

**Зелёный** (Нажимайте на кнопку ГАЛЬВАНИКА в течение 2 секунд для включения гальванических токов): МИКРОТОКИ (-)

\* Нанесите на кожу питательный крем или другие косметические средства. В результате процедуры кожа увлажняется, становится более гладкой и эластичной.

**Синий** (Нажмите на кнопку ГАЛЬВАНИКА второй раз): МИКРОТОКИ (+)

\* Нанесите на кожу крем / молочко для очищения кожи. Данная процедура способствует глубокому и эффективному очищению кожи, отшелушиванию, а также обеспечивает антисептическое воздействие.

## 7 Применение

**ВЫКЛ** (Нажмите на кнопку ГАЛЬВАНИКА третий раз): гальваническая функция отключена  
Индикатор зарядки: Во время зарядки аккумулятора горит зелёный индикатор; если же зарядка аккумулятора завершена, зелёный индикатор гаснет.

#### УЛЬТРАЗВУК / ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Зелёный (Нажимайте на кнопку УЛЬТРАЗВУК в течение 2 секунд для включения): УЛЬТРАЗВУК ВКЛ

**ВЫКЛ** (Нажмите на кнопку УЛЬТРАЗВУК второй раз): УЛЬТРАЗВУК ВЫКЛ

Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора: Зелёный индикатор мерцает 5 раз, затем отключается, и аппарат автоматически выключается.

1. При первом использовании косметического средства или после смены контактного геля следует провести тест на коже. Не вдавливайте массажер слишком сильно в вашу кожу, это может привести к снижению эффективности работы прибора.
2. Тщательно очистить и насухо протереть лицо. Увлажнить лицо кремом, сокращающим поры. Не пользуйтесь кремами, на основе масел — они не проводят ультразвук. Используйте повязку на голову, чтобы убрать с лица волосы, которые могут попасть на прибор и запутаться.
3. Прежде чем приступить к процедуре, необходимо проверить правильность работы прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Чтобы убедиться, что функция микротоков включена, удерживайте пальцами руки пассивные электроды гальваники, расположенные на боковых поверхностях аппарата.

4. Нанести 4-5 мл. косметического средства на поверхность контактного аппликатора. Нажмите на кнопку ГАЛЬВАНИКА и/или УЛЬТРАЗВУК в течение 2 секунд. Поместите контактный аппликатор на поверхность кожи и начните процедуру. Если нанесённого питательного крема окажется недостаточно, нанесите ещё и продолжите процедуру.

- 5.1. Длительность процедуры основного ухода за кожей лица около 4 минут с каждой стороны лица, всего 8 минут.

**ВНИМАНИЕ!** -> Каждое движение по массажной линии должно длиться приблизительно 5 секунд. Каждое движение выполняйте по 8 раз с каждой стороны, затем переходите к следующему движению.  
-> Используйте достаточное количества крема для увлажнения кожи для эффективного воздействия гальваники или ультразвука  
-> Все движения должны быть снизу вверх  
-> Перемещайте аппликатор по коже, придерживаясь массажных линий, показанных на рисунке:



- 5.2. Длительность процедуры интенсивного ухода за кожей лица около 1 минуты с каждой стороны лица, всего 2 минуты. Перемещайте аппликатор по коже, придерживаясь массажных линий движений, показанных на рисунке, попеременно с правой и левой стороны (каждое движение по массажной линии должно длиться приблизительно 5 секунд).