

CEN TEK®



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖЕР
СТ-2197

МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Порядок работы
4. Уход за прибором
5. Технические характеристики
6. Защита окружающей среды, утилизация прибора
7. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
8. Информация о производителе, импортере

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Использование прибора противопоказано:

- беременным женщинам;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогов и кожных заболеваний;
- в период приема болеутоляющих и успокоительных средств;
- людям, использующим кардиостимуляторы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности, в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Массажер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли

технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

- Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.

- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.

- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.

- Запрещается использование во время недомогания или сонливости.

- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.

- При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.

- Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.

- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.

- Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.

- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- массажер;
- сетевой адаптер (220 В);
- адаптер для прикуривателя (12 В);
- мешок для хранения;
- руководство по эксплуатации.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте прямого массажа позвоночника!

В ПОМЕЩЕНИИ:

1. Разместите устройство под шеей или подложите под спину.
2. Вначале подключите штекер сетевого адаптера к устройству, затем включите адаптер в розетку.

3. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON) один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).

4. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON) второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).

5. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON) третий раз для отключения функции прогрева.

6. Для выключения устройства нажмите кнопку ВЫКЛ (OFF) и выньте сетевой адаптер из розетки.

В АВТОМОБИЛЕ:

Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.

1. Разместите устройство под шеей или подложите под спину.

2. Вначале подключите штекер адаптера для прикуривателя к устройству, затем включите адаптер в розетку.

3. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON) один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).

4. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON) второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).

5. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON) третий раз для отключения функции прогрева.

6. Для выключения устройства нажмите кнопку ВЫКЛ (OFF) и выньте адаптер из прикуривателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не массируйте один участок тела более 3 мин.
- Не используйте устройство дольше 15 мин.
- Интервал между сеансами массажа не менее 15 мин.
- Массаж рекомендуется проводить по схеме «сверху вниз» (от шеи к спине).
- Людям с повышенной тактильной чувствительностью, для дополнительного комфорта, можно положить на массируемую часть тела полотенце.
- Сеанс массажа лучше проводить через час после приема пищи.
- Не используйте устройство лежа в кровати. Не допускается засыпание во время сеанса.
- Основные области применения: шейно-воротниковая зона, шея, плечи, спина, бедра, икры, ступни ног.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Выключите устройство с помощью кнопки ВЫКЛ (OFF) и отключите его от сетевого адаптера, предварительно выключив адаптер из сети.

2. Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью без применения чистящих средств. Допускается чистка влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, после этого прибор необходимо насухо протереть.

3. Храните в недоступном для детей месте.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания 220–240 В ~ 50/60 Гц;
- максимальная мощность 25 Вт;
- длина сетевого шнура 1.5 м;
- длина шнура для прикуривателя 1.3 м.

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2–600–900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ TC RU C–CN.ГР01.В.00556 от 20.03.2017.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортёр на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский,
ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

[illegible][illegible]

CENTEK®

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

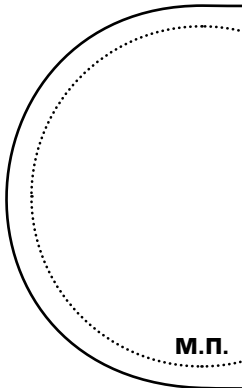
--

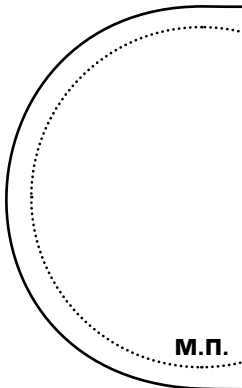
Печать продающей организации

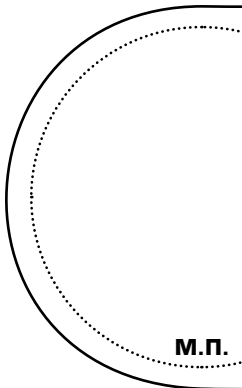
--

CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца

	КУПОН №3	
	ИЗДЕЛИЕ	
	МОДЕЛЬ	
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
	ДАТА ПРОДАЖИ	
	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

	КУПОН №2	
	ИЗДЕЛИЕ	
	МОДЕЛЬ	
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
	ДАТА ПРОДАЖИ	
	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

	КУПОН №1	
	ИЗДЕЛИЕ	
	МОДЕЛЬ	
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
	ДАТА ПРОДАЖИ	
	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владелец.

КУПОН №3

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПО- СТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

М.П.

КУПОН №2

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПО- СТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

М.П.

КУПОН №1

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПО- СТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14.

Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;

- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных

действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

WWW.CENTEK.RU

МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН