


ENERGY

Инструкция по эксплуатации

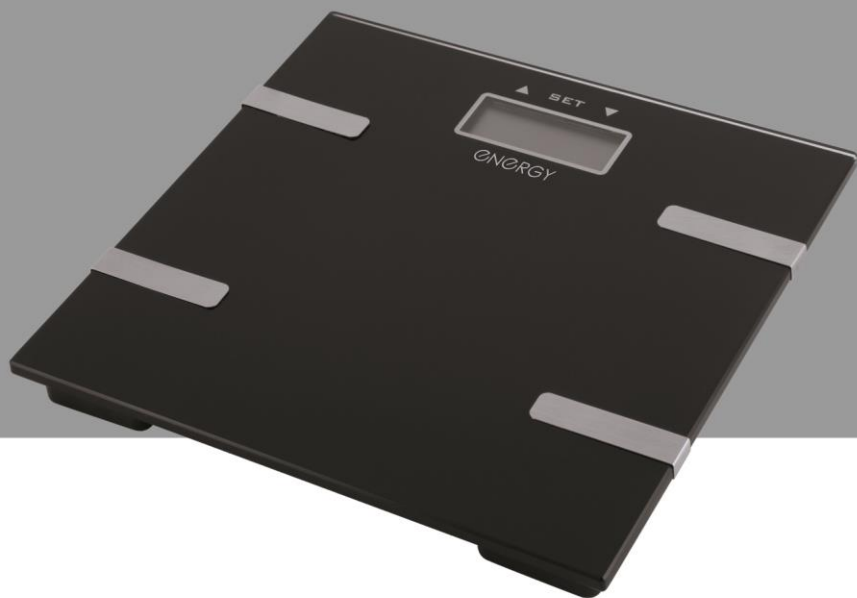

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ EN-407

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Весы с анализатором - это напольные весы, которые помимо веса определяют и другие показатели состояния организма: количество воды, жира, мышечной массы, массу костной ткани и норму потребления калорий.

Внимание:

1. Используйте прибор только в бытовых целях.
2. Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
3. Не допускайте попадания воды на весы.
4. Не вставайте на весы мокрыми ногами. Вы можете поскользнуться и упасть.
5. Не прыгайте на весы. Не ударяйте по весам.
6. Весы предназначены для персонального использования.
7. Взвешивайтесь на одном и том же месте, т.к. разные поверхности (покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания.
8. Рекомендуется взвешиваться утром перед приемом пищи.
9. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
10. Не используйте весы с анализатором, если у Вас установлен кардиостимулятор или другие имплантированные медицинские устройства. Весы пропускает через тело человека низкочастотный электрический сигнал, который может воздействовать на работу этих устройств.
11. ВАЖНО! Беременные женщины могут использовать только функцию измерения веса. Все остальные функции не рассчитаны для беременных женщин.
12. Не рекомендуется пользоваться анализатором сразу после купания или физических упражнений. Капли влаги, попадая на сенсоры весов, могут активировать весы и нарушить нормальную работу прибора.
13. Данная модель не предназначена для диагностики или определения наличия каких-либо заболеваний или отклонений от нормального состояния. Пожалуйста, консультируйтесь со своим лечащим врачом по всем вопросам, касающимся Вашего здоровья.

Установка / замена батареек

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Прибор работает от 2*AAA батареек (входит в комплект).

Использование весов

В основе работы весов с анализатором лежит принцип биоэлектрического сопротивления тканей, поэтому стоит учесть несколько факторов, которые могут влиять на точность измерений.

ВАЖНО! включенные мобильные телефоны, обогреватели, вентиляторы, высокая влажность воздуха (в ванной комнате, бане) негативно влияют на работу весов с анализатором.

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или другие мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. Перед тем как приступить к взвешиванию проведите предварительную настройку весов.
3. С помощью переключателя, расположенного на задней панели весов, вы можете выбрать необходимую меру измерения (килограммы, фунты).
4. Используйте кнопку **【SET】** для включения весов и для настройки параметров пользователя, память весов рассчитана на 12 пользователей P00-P11. После нажатия на кнопку **【SET】** на дисплее высветится P00, кнопками увеличения / уменьшения данных **【▲】** **【▼】** выберите номер пользователя.
5. Далее нажмите кнопку **【SET】** и кнопками **【▲】** **【▼】** установите пол, далее нажмите кнопку **【SET】** и кнопками **【▲】** **【▼】** установите возраст, после этого нажмите кнопку **【SET】** и кнопками **【▲】** **【▼】** установите рост. На этой предварительные настройки завершены. На экране отобразится 0,0 кг и пол.
6. Для обеспечения оптимальной проводимости обязательно становитесь на платформу весов босиком, стопы должны находиться на металлических датчиках.
7. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания, далее будут показаны следующие параметры:

- вес
- % жира
- % содержания воды
- % мышечной массы
- масса костной ткани
- норма потребления калорий.

8. Весы отключатся автоматически в течение нескольких секунд после измерения.

Группы населения по интенсивности труда	Возраст	Мужчины				Женщины			
		Большие города	Небольшие города и села	Дополнительная физическая нагрузка		Большие города	Небольшие города и села	Дополнительная физическая нагрузка	
				большие города	небольшие города			большие города	небольшие города
Лица, работа которых не связана с затратами физического труда (работники умственного труда, служащие)	18-40	2800	3000	3100	3300	2400	2600	2650	2850
	40-60	2600	2800	2800	3000	2200	2400	2350	2550
Работники механизированного труда и сферы обслуживания (телефонисты, продавцы и т. п.)	18-40	3000	3200	3300	3500	2550	2750	2800	3000
	40-60	2800	3000	3000	3200	2350	2550	2500	2700
Работники механизированного труда, труд которых связан со значительными физическими усилиями (станочники, текстильщики и т. п.)	18-40	3200	3400	3500	3700	2700	2900	2950	3150
	40-60	2900	3100	3100	3300	2500	2700	2650	2850
Работники частично механизированного труда (шахтеры, механизаторы, металлурги и т. п.)	18-40	3700	3900	4000	4200	3150	3350	3400	3600
	40-60	3400	3600	3600	3800	2900	3100	3050	3250
Люди пожилого возраста	60-70	2350	2500	2500	2650	2100	2200	2200	2500
	старше 70	2200				2000			

Таблица процентного содержания МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ в организме человека							
мужчины				женщины			
возраст	много	норма	мало	возраст	много	норма	мало
10-14	>57%	44-57%	<44%	10-14	>43%	36-43%	<36%
15-19	>56%	43-56%	<43%	15-19	>41%	35-41%	<35%
20-29	>54%	42-54%	<42%	20-29	>39%	34-39%	<34%
30-39	>52%	41-52%	<41%	30-39	>38%	33-38%	<33%
40-49	>50%	40-50%	<40%	40-49	>36%	31-36%	<31%
50-59	>48%	39-48%	<39%	50-59	>34%	29-34%	<29%
60-69	>47%	38-47%	<38%	60-69	>33%	28-33%	<28%
70-100	>46%	37-46%	<37%	70-100	>32%	27-32%	<27%

Таблица процентного содержания ВОДЫ в организме человека							
мужчины				женщины			
возраст	очень хорошо	хорошо	плохо	возраст	очень хорошо	хорошо	плохо
10-100	>65%	50-65%	<50%	10-100	>60%	45-60%	<45%

Таблица процентного содержания КОСТНОЙ МАССЫ в организме человека						
	мужчины			женщины		
вес тела	до 65 кг	65-95 кг	от 95 кг	до 50 кг	50-75 кг	от 75 кг
вес костей	2,66 кг	3,29 кг	3,69 кг	1,95 кг	2,40 кг	2,95кг

Возможные неисправности:

Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, убедитесь, что батарейка установлена верно. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр.

Сообщения об ошибках

- При перегрузке появляется надпись «EEEE».
- При низком заряде батареек появляется надпись LO и весы отключаются.

Хранение, уход и транспортировка

Рекомендуется протирать весы сухой (или слегка влажной) салфеткой.

При чистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а так же средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Храните прибор в сухом прохладном месте.

Бытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка – 180 кг.

Питание: батарейка 2xAAA (3В)

Срок службы – 3 года.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Состав (материал): стекло, металл, пластмасса.

Прибор работает от 2*AAA батареек (входят в комплект).

Дата производства товара указана на коробке.

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания. Масса тела человека не должна превышать 180 кг.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт", Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Импортер в Республике Беларусь: ООО «Асти Компани», Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7а, 26 этаж, каб. 3, 220004, тел. +375(44)5505091.

Производитель: Нинхай Шэнсян Электроник Ко.,Лтд (Ninghai Shengxiang Electronic Co.,Ltd)

Адрес: Дунцзя Сидиань Таун Нинхай Нинбо Чжэцзян Китай (Dongjia Xidian Town Ninghai Ningbo Zhejiang China)

Произведено в Китае.

ENERGY



Товар не подлежит обязательному
подтверждению соответствия